




PLEXTALK PTP1

Version 5

Guide de l'utilisateur

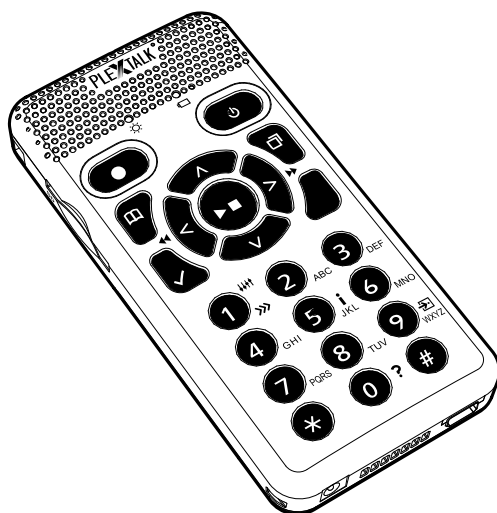

©2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.

INFORMATIONS IMPORTANTES.

NOTICE FCC.

Déclaration de Conformité

Numéro de modèle: PTP1

Marque: PLEXTALK

Organisme responsable: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Adresse: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Cet appareil est conforme au titre 15 des règles FCC, et remplit les deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne génère pas d'interférences gênantes et
- (2) cet appareil accepte la réception d'interférences, y compris d'interférences susceptibles de générer des opérations indésirables.

Cet équipement a été testé et déclaré en adéquation avec la classe B d'appareils audio numériques, conformément au titre 15 des règles FCC. Ces limites sont suffisantes pour garantir une protection raisonnable contre les interférences gênantes dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio-électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Néanmoins, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne puisse être émise avec une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences gênantes pour la réception radio ou télévision, ce qui peut être diagnostiqué en éteignant et rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger le problème par l'une des méthodes suivantes :

- Modifier l'emplacement ou l'orientation de l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise de courant n'appartenant pas au même circuit que celle à laquelle le récepteur est branché.
- Consulter son distributeur ou un technicien spécialisé en radio/TV.

ATTENTION :

Toute modification effectuée sans l'autorisation expresse de la partie responsable, annulera le droit du propriétaire à utiliser l'équipement.

Déclaration auprès du Département Canadien des Communications.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions radio, telles que définies dans le Radio Interference Regulations du Département Canadien des Communications.

Cet appareil numérique de la classe B répond à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ATTENTION :

La mise en œuvre de contrôles, de réglages ou de procédures de tests autres que celles décrites dans ce manuel peuvent conduire à une exposition dangereuse à des rayonnements.

Table des matières

INFORMATIONS IMPORTANTES.....	2
NOTICE FCC.	2
Déclaration auprès du Département Canadien des Communications.....	3
Table des matières	4
1. Mentions légales et copyright.	10
1.1. Copyright de ce manuel.	10
1.2. Licences et marques déposées.....	10
1.3. Restrictions pour la copie.....	10
1.3.1. Informations générales.....	11
1.3.2. CDs musicaux.	11
2. Pour bien démarrer.....	12
2.1. Termes et conventions utilisés dans ce manuel.....	12
2.2. Le contenu de l'emballage.	12
2.3. Description de l'appareil.	13
2.3.1. La face avant.....	13
2.3.2. La tranche supérieure.....	14
2.3.3. Le côté gauche.....	15
2.3.4. Le côté droit.....	15
2.3.5. La tranche inférieure.....	15
2.3.6. La face arrière.	15
2.4. Mise en place de la batterie.	16
2.5. Chargement du PLEXTALK.	16
2.6. Entretien et maintenance de la batterie.....	17
2.6.1. Entretien de l'appareil.	17
2.6.2. Entretien de la batterie.	17
2.6.3. Le pictogramme Poubelle Barrée.	18
2.7. Allumer et éteindre le PLEXTALK.....	18
2.8. Le descripteur de touches.....	19
2.9. Fonction de verrouillage du clavier.....	19
2.10. Insérer et retirer la carte SD	19
3. Utiliser le menu.....	21
3.1. Le menu principal.....	21
3.2. Accès au menu et navigation.	21
3.3. Raccourcis-clavier pour des options du menu.	22
4. Paramétrage du PLEXTALK.....	23
4.1. Sélectionner la synthèse vocale par défaut.....	23
4.2. Sélectionner la tonalité de la synthèse vocale.	23
4.3. Régler la date et l'heure.	23
4.4. Sélectionner le son d'attente.....	24

4.5. Sélection du son de confirmation.....	24
5. Gestion de l'alimentation.....	26
5.1. Avertissement de batterie faible.....	26
5.2. Extinction automatique.....	26
5.3. Extinction forcée.....	26
5.4. Fonction de mise en sommeil.....	26
5.4.1. Réglage de la mise en sommeil.....	26
5.4.2. Désactivation de la mise en sommeil.....	27
6. Fonctions de lecture communes à tous les formats.....	28
6.1. Arrêt et reprise de la lecture.....	28
6.2. Avance ou recul rapides.....	28
6.3. Modifier le volume.....	29
6.4. Modifier la vitesse de lecture.....	29
6.5. Modifier la tonalité.....	29
6.6. Modification du volume de l'assistance vocale.....	30
6.7. Modifier la vitesse de l'assistance vocale.....	30
6.8. Le menu de navigation.....	30
6.9. Sélection du support et de l'ouvrage.....	31
6.10. Navigation par ouvrage.....	31
6.11. Accéder directement à un titre.....	32
6.12. Modifier l'ordre de tri des titres.....	32
6.13. Obtenir des informations sur le support et les fichiers.....	33
6.14. Obtenir des informations sur le statut actuel.....	33
6.15. Sélection du mode de lecture.....	34
6.16. Utiliser les signets.....	34
6.16.1. Les différents types de signets.....	34
6.16.2. Insérer des signets.....	35
6.16.3. Naviguer dans les signets.....	35
6.16.4. Effacer les signets.....	36
6.16.5. Activer et désactiver la lecture des signets vocaux.....	36
6.17. Organisation et gestion des fichiers et des dossiers.....	37
7. Lecture des ouvrages DAISY.....	38
7.1. Naviguer par titre.....	38
7.2. Atteindre le début ou la fin de l'ouvrage.....	38
7.3. Naviguer par page.....	39
7.4. Naviguer par groupe.....	39
7.5. Naviguer par phrase.....	39
7.6. Sauts dans le temps, par 30 secondes ou par 10 minutes.....	40
7.7. Naviguer par écran, paragraphe, ligne, phrase, épeler, mot ou caractère, dans les ouvrages Daisy texte.....	40
7.8. Navigation par pourcentage.....	40
7.9. Modes de lecture.....	41

7.10. Paramétrages pour l'écoute des ouvrages DAISY multimédia.....	41
8. Lecture des enregistrements.....	42
9. Écoute de fichiers audio et de CDs musicaux.	43
9.1. Naviguer par piste.....	43
9.2. Naviguer par album.....	44
9.3. Déplacements de 10 minutes ou de 30 secondes.....	44
9.4. Modes de lecture.....	44
9.5. Annonce des pistes ou des albums par leur nom ou leur numéro.....	45
9.6. À propos de l'ordre de lecture.	45
9.7. Restrictions pour les fichiers audio.....	45
10. Lecture des fichiers-texte.	47
10.1. Naviguer par écran, paragraphe, ligne, phrase, épeler, mot ou caractère.	47
10.2. Navigation par pourcentage.	47
10.3. Modes de lecture.....	48
11. Lecture de livres audio.....	49
12. Podcast.....	50
12.1. Ajouter un podcast dans le PLEXTALK.....	50
12.2. Première écoute d'un podcast.....	50
12.3. Écoute des podcasts.....	51
12.4. Navigation par épisode, par 10 minutes ou 30 secondes.....	51
12.5. Obtenir la liste des épisodes récents.	52
12.6. Télécharger tous les épisodes d'un podcast.	52
12.7. Informations pendant le téléchargement.	53
13. Web radio	54
13.1. Ajouter des stations de Web radio à la liste de lecture.....	54
13.2. Écouter une Web radio	54
14. Enregistrer un ouvrage DAISY.	55
14.1. Informations de base pour enregistrer avec PLEXTALK.....	55
14.2. Matériel pour l'enregistrement.....	55
14.3. Supports pour les enregistrements.	56
14.4. Les différents états d'enregistrement.	56
14.5. Techniques de base pour l'enregistrement.	57
14.6. Désactiver la synthèse vocale lors de l'enregistrement.....	57
14.7. Connecter et sélectionner une source extérieure.....	58
14.8. Sélectionner le mode d'enregistrement et la qualité sonore.....	59
14.8.1. À propos des modes d'enregistrement et des qualités sonores.	59
14.8.2. Sélectionner un mode d'enregistrement prédéfini.	60
14.8.3. Sélectionner le mode d'enregistrement personnalisé.	61
14.9. Sélectionner l'ouvrage dans lequel effectuer l'enregistrement.	61
14.10. Ajuster le niveau d'enregistrement.	62
14.11. Utiliser le niveau de retour.....	63
14.12. Activer/désactiver le retour d'enregistrement.	64

14.13. Obtenir des informations sur l'enregistrement.....	64
15. Édition d'un ouvrage DAISY.	65
15.1. Gestion des marques de titres pendant l'enregistrement.	65
15.2. Insérer un titre après l'enregistrement.....	65
15.3. Annuler un titre après l'enregistrement.....	66
15.4. Effacer une ou plusieurs sections.	66
16. Gestion des supports.....	68
16.1. Effacer une carte SD.....	68
16.2. Créer un nouvel ouvrage.....	68
16.3. Supprimer un ouvrage.....	68
16.4. Effacer un fichier.	69
16.5. Préparer un ouvrage pour l'édition.	69
16.6. Créer un ouvrage DAISY compatible.	70
16.7. Fonctions du dossier réseau.	71
17. Les fonctions MÉMO du PLEXTALK.	72
17.1. Enregistrer un nouveau mémo vocal.....	72
17.2. Consulter les mémos existants.	72
17.3. Sauvegarder les mémos vocaux sur carte SD.	73
17.4. Effacer des mémos vocaux.....	73
18. Sauvegarde.	74
18.1. Informations générales sur la sauvegarde.	74
18.2. Sauvegarder les mémos vocaux.....	74
18.3. Sauvegarde d'un ouvrage DAISY, d'un album ou d'un fichier-texte depuis une carte SD vers un support USB externe.	75
18.4. Sauvegarde d'un ouvrage DAISY, d'un album ou d'un fichier-texte depuis un support USB externe vers une carte SD.	75
18.5. Temps pour la copie des CDs musicaux.....	76
19. Utiliser PLEXTALK comme lecteur de carte SD externe.	77
19.1. Que peut faire PLEXTALK une fois connecté à un ordinateur?	77
19.2. Connexion du PLEXTALK à l'ordinateur comme lecteur externe.	77
19.3. Déconnecter le PLEXTALK de l'ordinateur.	78
20. Paramètres réseau.....	79
20.1. Connexion à un réseau sans fil.....	79
20.1.1. Activation de la fonction sans fil.....	79
20.1.2. Vérification des paramètres réseau et connexion.....	79
20.2. Comment PLEXTALK se connecte-t-il à un réseau.....	81
20.3. Paramètres réseau avancés.	81
20.3.1 Confirmation des informations réseau.....	82
20.3.2 Chargement des paramètres réseau.....	82
20.3.3. Sauvegarder les paramètres réseau.	83
20.3.4. Ajouter des paramètres réseau.	84
20.3.5. Modifier ou supprimer des paramètres de réseau sans fil.....	84

20.3.6. Paramètres du dossier réseau.....	85
20.3.7. Remettre les paramètres réseau à leurs valeurs par défaut.....	86
21. Edition des fichiers texte.....	88
21.1. Création de fichiers texte.....	88
21.2. Edition d'un fichier existant sur la carte SD.....	88
21.3. Sauvegarder un fichier texte.....	88
21.4. Quitter le mode édition.....	89
21.4.1. Sauvegarder et quitter le mode édition.....	89
21.4.2. Quitter le mode édition sans sauvegarde.....	89
21.5. Renommer un fichier.....	90
21.6. Supprimer la ligne en cours.....	90
21.7. Effacer tout le texte.....	90
22. Saisie de texte.....	91
22.1. Saisie en mode ABC.....	91
22.2. Saisie des chiffres en mode numérique.....	92
22.3. Saisie de caractères particuliers depuis le tableau des symboles.....	92
22.4. Déplacer le point d'insertion.....	93
22.5. Insérer des espaces, retours à la ligne, et supprimer des caractères.....	94
23. Autres fonctions.....	95
23.1. Le fichier d'aide intégré.....	95
23.2. Vérification des propriétés du système.....	95
23.3. Supprimer les clés d'autorisation.....	95
23.4. Réinitialisation avec les paramètres par défaut.....	96
Annexe A - Caractéristiques générales.....	98
Caractéristiques générales.....	98
Caractéristiques Audio.....	99
Fonctions principales.....	100
Caractéristiques de la batterie.....	101
Caractéristiques du lecteur de cartes.....	101
Fonctions réseau sans fil.....	102
Information de Copyright pour Ogg Vorbis.....	102
Annexe B - Structure du Menu.....	103
Annexe C - En cas de problème.....	106
Problèmes lors de l'utilisation courante.....	106
Messages d'erreurs annoncés au cours de la lecture d'un ouvrage DAISY.....	107
Erreurs lors de l'utilisation des mémos vocaux.....	107
Erreurs lors de l'utilisation du PLEXTALK comme lecteur de cartes SD sur un ordinateur.....	107
Annexe D - Informations techniques concernant les modes d'enregistrement et les qualités sonores.....	109
1. Paramètres des modes d'enregistrement.....	109
2. Valeurs des paramètres selon les modes prédéfinis.....	109

3. Valeurs possibles des paramètres en mode Personnalisé.....	110
4. Temps d'enregistrement disponibles en fonction des qualités sonores.	110
Annexe E: Questions et réponses sur les paramètres réseau	112
Annexe F: Liste des combinaisons de touches pour la saisie.	114

1. Mentions légales et copyright.

Ce chapitre contient des informations importantes concernant les droits d'auteurs, licences et marques déposées. Il expose également les restrictions qui s'appliquent lorsque vous utilisez le PLEXTALK pour copier ou enregistrer du son. Il est important de le lire intégralement avant de poursuivre.

1.1. Copyright de ce manuel.

Shinano Kenshi se réserve le droit de modifier les produits décrits dans ce manuel sans préavis.

Shinano Kenshi ne représente ni ne garantit le contenu ci dessous et se désengage expressément de toute garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation dans quelque but que ce soit. En outre, Shinano Kenshi Co., Ltd se réserve le droit de modifier ce manuel et son contenu, sans être tenu d'informer aucune personne ou aucun organisme de ces modifications ou révisions.

Ce manuel est soumis à copyright, tous droits réservés. Il ne doit être ni copié, photocopié, traduit, compressé pour un format électronique ou pour une machine à lire, sans l'autorisation préalable de Shinano Kenshi.

© pour le manuel, copyright 2008, Shinano Kenshi Co., Ltd.

1.2. Licences et marques déposées.

Toutes les licences et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs.

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

iTunes est une marque déposée d'Apple Inc.

1.3. Restrictions pour la copie.

Avant d'utiliser votre PLEXTALK, nous vous demandons de lire attentivement ce qui suit, afin de vous assurer de bien connaître les restrictions légales liées à certaines opérations.

1.3.1. Informations générales.

Cet appareil PLEXTALK est conçu pour vous faciliter l'enregistrement et le travail du son, pour lesquels vous possédez les droits d'auteur, ou avez obtenu la permission des détenteurs de ces droits, ou de leurs ayant droit. Si vous ne possédez pas ces droits, ou n'avez pas obtenu d'autorisation des détenteurs de ces droits ou de leurs ayant droit, les enregistrements, reproductions ou distributions sont alors illégaux, et entraînent des peines sévères, tant civiles que criminelles, au regard des lois sur les droits d'auteur et des traités internationaux régissant le copyright.

Si vous n'êtes pas certain de vos droits, contactez votre conseiller juridique.

En aucun cas, Shinano Kenshi ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de l'utilisation de copies illégales réalisées avec PLEXTALK.

1.3.2. CDs musicaux.

Les CDs musicaux distribués dans le commerce sont réservés à une utilisation privée, et, selon le copyright Act, ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation sans l'autorisation du détenteur du copyright.

2. Pour bien démarrer.

2.1. Termes et conventions utilisés dans ce manuel.

Cette section décrit de façon détaillée les termes et conventions utilisés dans ce manuel.
Il s'agit de :

- **DANGER** : La mention "Danger" signale que le non-respect de la consigne peut entraîner des dommages corporels.
- **ATTENTION** : La mention "Attention" signale que le non-respect de la consigne peut entraîner la destruction ou une panne sur le PLEXTALK lui-même, la destruction du support d'enregistrement, la perte des données, ou l'altération de la configuration du PC.
- **NOTE** : Une note apporte des informations importantes à propos d'une fonction qui n'a pas encore été décrite dans le manuel.
- **Cartes SD** : Le PLEXTALK est compatible avec les cartes SD et SDHC. Dans ce manuel, les deux types de cartes sont regroupés sous le nom "cartes SD".

2.2. Le contenu de l'emballage.

Voici tout ce que vous devez trouver dans la boîte de votre PLEXTALK.

Vérifiez que vous avez bien reçu tous les éléments, et, dans le cas contraire, contactez au plus vite votre distributeur.

Si des éléments manquent, contactez votre distributeur local.

- 1 PLEXTALK POCKET
- 1 carte SD de 2Go (la carte SD est déjà installée dans l'appareil).
- 1 alimentation secteur
- 1 batterie rechargeable
- 1 casque stéréo
- 1 câble USB (long) pour la connexion à un ordinateur
- 1 câble USB (court) pour la connexion à un périphérique externe
- 1 housse
- 1 guide de l'utilisateur sur CD
- 1 guide de prise en main
- 1 guide des consignes de sécurité

NOTE : Il est vivement conseillé de conserver le carton et les divers emballages, pour le cas où vous auriez besoin de renvoyer le PLEXTALK, pour quelque raison que ce soit.

2.3. Description de l'appareil.

Vous trouverez dans cette section la description de l'appareil, la position des touches et des autres éléments, ce qui vous permettra de les localiser facilement lors de l'étude des chapitres suivants. Leur nom et leur fonction principale sont également indiqués ici.

Lorsque vous avez l'appareil bien en main, prenez le temps de localiser la face avant. La face avant est constituée d'une grille recouvrant le micro et le haut-parleur d'une part, et de 23 touches disposées sur le reste de la surface du boîtier. Positionnez l'appareil de sorte que les touches soient proches de vous, et la grille plus éloignée. Le PLEXTALK doit être orienté selon sa position normale d'utilisation. Gardez l'appareil dans cette position afin de bien repérer les différents éléments.

2.3.1. La face avant.

La grille qui a servi de repère pour bien orienter l'appareil, recouvre le haut-parleur et le micro interne. Le haut-parleur est situé sur la droite, et le micro au centre.

Juste sous la grille, au milieu, se trouvent deux voyants lumineux. À gauche, le voyant de mise en marche. Il est éteint lorsque l'appareil est éteint. Il devient orange pendant la phase d'allumage de l'appareil. Il devient vert lorsque l'appareil est allumé et opérationnel. À droite, le voyant de la batterie. Il est éteint lorsque l'appareil fonctionne sur batterie. Pendant la première phase de rechargement de la batterie, il s'éclaire en rouge. Pendant la seconde phase de chargement, il passe alternativement du rouge au vert, et reste vert lorsque la batterie est complètement rechargée.

Sous la grille, de part et d'autre, deux boutons de forme ovale. À gauche, de couleur rouge, la touche Enregistrement, utilisée pour les enregistrements au format DAISY, et l'enregistrement des mémos vocaux et des signets vocaux. À droite, de couleur verte, la touche Marche/Arrêt, qui sert à allumer et éteindre l'appareil, et à régler le délai de mise en sommeil. Deux points saillants sont situés au centre de cette touche.

Sous les touches Enregistrement et Marche/Arrêt, quatre touches de fonction, deux à gauche, deux à droite. En haut à gauche, la touche Aller À, utilisée pour la navigation par page ou par titre. En bas à gauche, la touche Signet, utilisée pour atteindre, poser, ou supprimer les signets. En haut à droite, la touche Menu, utilisée pour entrer et sortir du menu. Maintenez-la appuyée pour activer ou désactiver le mode "descripteur de touches".

En bas à droite, la touche Ouvrage, qui permet de passer d'un ouvrage à l'autre, ou de changer de support.

Entre ces quatre touches de fonction, au milieu de l'appareil, la touche Lecture/Stop, de forme ronde, entourée des quatre flèches Haut, Bas, Gauche et Droite. La touche Lecture/Stop, de couleur bleue, est légèrement en creux. Elle permet de débiter et d'interrompre la lecture, et peut remplacer la touche Validation dans certaines procédures. La touche Haut permet de se déplacer à l'élément précédent dans la liste des options de navigation. Elle permet également d'augmenter la vitesse et la tonalité, et d'abandonner une procédure. La touche Bas permet de se déplacer à l'élément suivant dans la liste des options de navigation. Elle permet également de diminuer la vitesse et la tonalité, et remplace la touche Validation dans certaines procédures. La touche Gauche permet de se déplacer vers la gauche dans les menus, ou de reculer dans un ouvrage. Maintenez-la enfoncée pour activer le recul rapide pendant l'écoute. La touche Droite permet de se déplacer vers la droite dans les menus, ou d'avancer dans un ouvrage. Maintenez-la enfoncée pour activer l'avance rapide pendant l'écoute.

Sous les touches de fonction et les flèches, douze petites touches de forme ronde, disposées en quatre rangées de trois touches. Elles forment le pavé numérique. Ce pavé numérique est organisé comme celui des téléphones. La première rangée regroupe les chiffres 1, 2 et 3. La deuxième rangée regroupe les chiffres 4, 5 et 6. La troisième rangée regroupe les chiffres 7, 8 et 9, et la quatrième l'étoile, le chiffre 0 et le dièse. Le chiffre 5 est facile à repérer grâce à un point sur la touche.

Certaines de ces touches ont des fonctions secondaires, dont voici la liste :

- La touche 1 permet de modifier la vitesse et la tonalité, conjointement avec les flèches Haut et Bas.
- La touche 5 est la touche Information. Appuyez-la une fois pour commencer l'écoute de toutes les informations, plusieurs fois pour passer rapidement d'une information à l'autre. Maintenez-la appuyée pour entendre la date et l'heure.
- La touche 9 est la touche Sauvegarde.
- La touche 0 est la touche d'aide. Appuyez-la pour entrer et sortir du mode Aide.
- La touche Étoile est la touche Annulation.
- La touche Dièse est la touche Répéter ou Validation.

Dans ce guide, le terme Validation correspond aux touches Lecture/Stop, Flèche Bas et Dièse. Le terme Annulation correspond à la flèche Haut et à la touche Étoile.

2.3.2. La tranche supérieure.

Sur la tranche supérieure, deux prises, l'une à gauche, l'autre au centre. La prise de gauche permet de brancher un micro externe ou une entrée-ligne, celle du milieu permet de brancher un casque. Ce sont des prises jack 3,5mm.

Dans le coin supérieur gauche, un petit trou permet de passer une courroie de transport.

2.3.3. Le côté gauche.

Sur le côté gauche, au niveau de la touche Enregistrement, le lecteur de cartes SD.

2.3.4. Le côté droit.

Sur le côté droit du boîtier, deux interrupteurs. Celui du haut permet d'augmenter ou de diminuer le volume. En poussant l'interrupteur vers le haut, on augmente le volume. En le tirant vers le bas, on diminue le volume.

L'interrupteur du bas permet de verrouiller le clavier. Ceci permet d'éviter un appui accidentel sur les touches, y compris sur la touche Marche/Arrêt. En poussant l'interrupteur vers le haut, le clavier est bloqué. En tirant l'interrupteur vers le bas, le clavier est débloqué.

2.3.5. La tranche inférieure.

Deux éléments sont situés sur la tranche inférieure du boîtier. À gauche, un trou de forme ronde, situé dans un espace carré du boîtier. Il s'agit de la prise d'alimentation. À droite, un petit connecteur de forme rectangulaire. Il s'agit de la prise USB.

2.3.6. La face arrière.

Retournez le boîtier, et tenez-le dans votre main, la grille étant toujours positionnée loin de vous.

Au milieu de la face arrière, deux rainures. Elles délimitent la partie supérieure du couvercle du compartiment de la batterie. En bas de l'appareil, toujours sur la face arrière, un bouton rectangulaire affleure la surface du boîtier. Il correspond au bas du couvercle du compartiment de la batterie, et permet de l'ouvrir.

Pour ouvrir le couvercle, appuyez fermement avec un doigt sur le bouton rectangulaire. En même temps, avec le pouce de l'autre main, poussez vers le bas sur les rainures du couvercle. Vous aurez peut-être besoin de plusieurs essais pour réussir ce mouvement.

2.4. Mise en place de la batterie.

Pour installer ou remplacer la batterie, procédez comme suit:

- Éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation.
- Retirez le couvercle comme décrit ci-dessus, et posez le PLEXTALK et son couvercle.
- Prenez la batterie et orientez-la de sorte que la tranche totalement lisse soit positionnée loin de vous, avec celle comportant deux ergots sur votre droite. Ces deux ergots correspondent aux contacts de la batterie.
- Si la batterie est correctement positionnée, vous localisez deux autres ergots, de part et d'autre du coin inférieur gauche. Notez qu'ils sont utiles pour retirer la batterie.
- Prenez le PLEXTALK, avec la face arrière sur le dessus, et le compartiment de la batterie vers vous. Insérez la batterie avec précaution, pour faire coïncider les contacts le long du bord droit du boîtier. Vous devez donc insérer la batterie de gauche à droite dans son logement.
- Positionnez les contacts avec précaution dans leur logement, et appuyez ensuite doucement sur la partie gauche de la batterie, celle-ci doit s'emboîter dans le compartiment. Ne forcez pas pour insérer la batterie, qui doit se mettre en place d'elle-même.
- Placez le couvercle, au-dessus du compartiment de la batterie, à environ 5 millimètres de sa position normale. Tout en approchant le couvercle du boîtier, glissez-le doucement vers le haut de l'appareil, jusqu'à ce que le bouton de forme rectangulaire se positionne dans son logement et se verrouille.

DANGER : Vous ne devez utiliser que les batteries recommandées pour cet appareil.

Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez une explosion ou un incendie.

Note: pour retirer la batterie, glissez un ongle sous l'un des ergots situés au coin inférieur gauche, et tirez doucement pour la sortir du compartiment. Ces manipulations peuvent demander un peu de temps, pour acquérir la technique.

2.5. Chargement du PLEXTALK.

Pour recharger la batterie, il faut brancher le PLEXTALK au secteur au moyen de l'alimentation, ou à un PC via le câble USB. Procédez comme suit:

- Placez le PLEXTALK dans sa position normale.
- Pour charger le PLEXTALK sur secteur, branchez le câble de l'alimentation à la prise située sur la tranche inférieure, en bas à gauche. Puis branchez la prise au secteur. Le rechargement de la batterie débute.
- Pour recharger la batterie depuis un PC, branchez la petite prise du câble le plus long dans le connecteur USB, en bas à droite sur la tranche inférieure. Puis branchez la prise la plus large à un port USB libre sur le PC. Vérifiez que l'ordinateur soit allumé, le chargement de la batterie débute.

ATTENTION: Ne forcez jamais sur la prise USB, au risque de l'endommager.

Note: Il est possible de recharger l'appareil en USB même s'il est éteint.

2.6. Entretien et maintenance de la batterie.

2.6.1. Entretien de l'appareil.

Retirez les poussières et salissures du boîtier à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'un détergent doux et neutre, puis essuyez-le avec un chiffon sec.

ATTENTION: Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

2.6.2. Entretien de la batterie.

Afin de tirer le meilleur parti de votre batterie rechargeable, soyez attentif aux points suivants :

- Le temps normal pour une recharge complète de la batterie est de 4 heures. Lorsque vous utilisez le PLEXTALK pour la première fois, ou après des mois d'inactivité, vous devez le brancher sur le secteur pendant au moins 24 heures.
- Si le PLEXTALK n'est pas utilisé pendant une période de plus d'un mois, retirez la batterie et rangez-la dans un endroit frais, à l'abri de l'humidité.
- La durée de vie de la batterie dépend de son utilisation et du nombre de recharges. Sa capacité à se recharger diminue avec le temps. Lorsque l'autonomie de la batterie après une charge complète devient trop courte, remplacez-la par une batterie neuve. Vous pourrez commander les batteries auprès de votre distributeur, qui pourra également vous conseiller pour le recyclage de l'ancienne batterie.
- La durée de vie de la batterie peut être influencée par la température ou l'environnement de travail.

Afin de prolonger la durée de vie de votre batterie, procédez aux manipulations suivantes, tous les six mois :

- Effectuez une charge complète de la batterie
- Utilisez PLEXTALK sur batterie jusqu'à ce qu'elle soit vide
- Rechargez-la complètement avant de réutiliser l'appareil.

2.6.3. Le pictogramme Poubelle Barrée.

Le pictogramme "Poubelle Barrée" relatif au recyclage des piles et batteries, est imprimé sur la batterie et à l'intérieur du compartiment batterie.



Note: Ce symbole n'est utilisé que dans les pays de la Communauté Européenne.

Ce symbole est relatif à la directive européenne 2006/66/EC. Il signifie que les batteries et les piles usagées, doivent être collectées séparément des ordures ménagères. Lorsqu'un symbole chimique est imprimé sous ce symbole, cela signifie qu'un métal lourd, à une concentration déterminée, est présent dans la pile ou la batterie, selon la liste ci-dessous:

Hg: mercure (0.0005%)

Cd: cadmium (0.002%)

Pb: plomb (0.004%)

Si elles ne sont pas traitées de façon appropriée, ces substances sont nocives pour les personnes et pour l'environnement. Dans l'Union Européenne, les piles et batteries usagées sont récupérées à part lors de la collecte des déchets. Merci de respecter les dispositions en vigueur dans votre pays pour recycler les piles et batteries usagées. Les batteries utilisées dans nos appareils sont conçues pour permettre le recyclage.

2.7. Allumer et éteindre le PLEXTALK.

Pour allumer et éteindre l'appareil, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et maintenez-la enfoncée pour allumer l'appareil. Lorsque l'appareil s'allume, le témoin lumineux de gauche devient orange, puis vert.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pour passer en mode veille. Maintenez-le enfoncé 3 secondes de plus pour éteindre l'appareil.

Note: En mode veille, un appui sur n'importe quelle touche réactive le PLEXTALK.
L'heure sont annoncés.

Note: En mode veille, la batterie se vide graduellement.

Note: La procédure d'initialisation prend environ 40 secondes après une extinction totale ou le remplacement de la batterie.

Note: Lors de l'extinction de l'appareil, si vous n'appuyez pas suffisamment longtemps sur la touche, le mode "mise en sommeil" est activé.

Note: Si le clavier est verrouillé, l'appui sur la touche Marche/Arrêt est sans effet.

2.8. Le descripteur de touches.

Comme son nom l'indique, le descripteur de touches permet de connaître l'utilisation de chacune des touches, ce qui est particulièrement utile pour une prise en main rapide.

- Activez le descripteur de touches en appuyant sur la touche Menu pendant au moins 5 secondes. À partir de ce moment, chaque appui sur une touche provoque l'annonce de la fonction de cette touche.
- Désactivez le descripteur de touches en appuyant sur la touche Menu pendant au moins 5 secondes.

2.9. Fonction de verrouillage du clavier.

La fonction de verrouillage du clavier permet de bloquer les touches, afin d'éviter tout appui accidentel.

Pour bloquer le clavier, poussez l'interrupteur de verrouillage du clavier vers le haut.
Pour débloquer le clavier, tirez l'interrupteur de verrouillage du clavier vers le bas.

2.10. Insérer et retirer la carte SD

Pour insérer une carte SD, procédez comme suit :

- Éteignez l'appareil.

- Positionnez la carte de sorte que le coin coupé se trouve en bas à droite, c'est-à-dire tourné vers l'avant de l'appareil. En d'autres termes, le coin coupé de la carte doit être placé vers le bas de l'appareil.
- Glissez la carte dans le lecteur situé sur le côté gauche de l'appareil.
- Poussez la carte à fond dans le lecteur, sans forcer, afin que le bord se trouve au ras du boîtier.

Pour retirer la carte SD, procédez comme suit :

- Éteignez l'appareil.
- Poussez la carte vers l'intérieur du boîtier puis relâchez-la. La carte ressort, de telle sorte que le bord dépasse du boîtier.
- Prenez la carte et retirez-la du lecteur.

ATTENTION : Le lecteur de cartes SD du PLEXTALK est compatible avec les cartes de type SD ou SDHC. En utilisant un autre type de cartes (MMC ou autres), vous risquez de détériorer la carte ou le lecteur.

NOTE : Les cartes SD possèdent un système de verrouillage pour éviter d'effacer accidentellement les données. Il se situe sur le côté le plus long, face au coin coupé. Si l'interrupteur est poussé vers l'avant de la carte, vous pourrez enregistrer et supprimer des ouvrages. S'il est plus éloigné du bord de la carte, les données seront protégées.

3. Utiliser le menu.

On accède à beaucoup de fonctions de PLEXTALK à partir du menu principal. L'objectif de ce chapitre est de vous présenter la structure de ce menu et les procédures pour y accéder.

3.1. Le menu principal.

Le niveau supérieur est appelé "Menu principal", et il contient 7 entrées, qui sont :

- Édition - permet des opérations simples d'édition des ouvrages Daisy.
- Paramètres d'enregistrement - permet de sélectionner parmi les jeux de paramètres prédéfinis pour l'enregistrement, ou de définir vos propres paramètres.
- Paramètres de lecture - Permet de vérifier les paramètres et de modifier la façon dont les noms des albums et des pistes sont annoncés.
- Signets - permet de définir le mode de lecture des signets vocaux, et de supprimer tous les signets en une seule opération.
- Mémos vocaux - pour l'enregistrement de messages courts.
- Podcast - Pour la récupération et l'écoute d'épisodes de podcasts.
- Gestion du support - pour obtenir des informations sur le support utilisé, créer des ouvrages DAISY, effacer la carte SD et autres options.
- Paramètres du système : pour gérer les fonctions principales de l'appareil, et accéder aux informations générales.

3.2. Accès au menu et navigation.

Procédez comme suit pour naviguer dans le menu :

- Entrez dans le menu en appuyant sur la touche Menu.
- Pour sélectionner une option au même niveau de menu, appuyez sur la touche Gauche pour se déplacer vers la gauche, sur la touche Droite pour se déplacer vers la droite. Lorsque vous vous déplacez sur une option, elle est immédiatement annoncée.
- Dans tous les menus, en se déplaçant dans la même direction, on revient sur l'option de départ, c'est ce qu'on appelle un menu en boucle.
- Pour sélectionner l'option de menu en cours, appuyez sur la touche Bas ou sur Validation. Si on suppose qu'il y a un sous-menu et qu'il est disponible, vous vous trouvez alors au niveau inférieur du menu, sur la première option du sous-menu.
- Pour remonter d'un niveau dans le menu, appuyez sur la touche Haut.

- Pour quitter le menu, depuis n'importe quel niveau, appuyez sur la touche Menu.

3.3. Raccourcis-clavier pour des options du menu.

Il est possible d'associer une option du menu à une touche du pavé numérique.

Pour associer une option de menu à une touche du pavé numérique, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu et déplacez-vous jusqu'à l'option choisie.
- Tout en appuyant sur la touche Menu, appuyez sur la touche de votre choix du pavé numérique, jusqu'à ce qu'un signal de confirmation soit émis. PLEXTALK associe alors l'option du menu à la touche du pavé numérique.

Pour exécuter une option de menu associée à une touche du pavé numérique, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu, et maintenez-la enfoncée, puis appuyez et relâchez la touche du pavé numérique correspondante. Vous pouvez alors exécuter la commande du menu.

4. Paramétrage du PLEXTALK.

4.1. Sélectionner la synthèse vocale par défaut.

Vous avez le choix entre deux synthèses vocales.

Pour choisir votre voix préférée, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "paramètres du système" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Utilisez les touches Gauche et Droite pour atteindre l'option "voix de lecture de texte" et confirmez en appuyant sur la touche Validation.
- Utilisez les touches Gauche et Droite pour choisir la voix qui vous convient et confirmez en appuyant sur la touche Validation. PLEXTALK enregistre votre nouveau réglage et quitte le menu.

Note: Si vous changez de langue, le Plectalk redémarre.

4.2. Sélectionner la tonalité de la synthèse vocale.

Pour régler la tonalité de la synthèse vocale, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "paramètres du système" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Utilisez les touches Gauche et Droite pour atteindre l'option "tonalité de la voix de synthèse" et confirmez en appuyant sur la touche Validation.
- Utilisez les touches Gauche et Droite pour choisir la valeur entre -5 et 5, 0 correspondant à la valeur normale, et confirmez en appuyant sur la touche Validation.

4.3. Régler la date et l'heure.

Pour régler la date et l'heure, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "paramètres du système" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.

- Sélectionnez l'option "réglage de la date et de l'heure" dans le menu, et appuyez sur Validation.
- À l'aide du pavé numérique, entrez l'année puis validez, ou validez simplement si l'année annoncée est correcte.
- Entrez le mois sur un ou deux chiffres avec le pavé numérique puis validez, ou validez simplement pour accepter la valeur proposée.
- Entrez le jour sur un ou deux chiffres avec le pavé numérique puis validez, ou validez simplement pour accepter la valeur proposée.
- À l'aide du pavé numérique, entrez l'heure, sur quatre chiffres, en utilisant des zéros si nécessaire.
- Afin de vérifier le réglage, la date et l'heure sont automatiquement annoncés.

Note: Si vous avez entré un nombre incorrect, appuyez sur Annulation pour l'effacer puis recommencez.

Note: Pour vérifier l'heure et la date, appuyez et maintenez la touche 5 enfoncée.

4.4. Sélectionner le son d'attente.

Pendant certaines actions, par exemple lors des accès à un support, un son est émis pour indiquer que PLEXTALK est occupé par une procédure en cours.

Pour choisir le son d'attente, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "paramètres du système" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Utilisez les touches Gauche et Droite pour choisir l'option "son d'attente" et confirmez en appuyant sur la touche Validation.
- Utilisez les touches Gauche et Droite pour écouter les différentes propositions, et validez sur le son qui vous convient.

4.5. Sélection du son de confirmation.

PLEXTALK vous permet de choisir si un son de confirmation doit être émis ou non.

Pour définir le son de confirmation, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "paramètres du système" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Utilisez les touches Gauche et Droite pour sélectionner l'option "bips clavier" et validez.

- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour choisir entre "bips clavier activés" ou "bips clavier désactivés", et confirmez en appuyant sur Validation. PLEXTALK enregistre ce nouveau réglage et redémarre.

5. Gestion de l'alimentation.

5.1. Avertissement de batterie faible.

Lorsque le PLEXTALK fonctionne sur batterie et que le niveau de celle-ci baisse, le message "Batterie faible", est émis. PLEXTALK s'éteindra dans une minute. Si vous souhaitez continuer à utiliser PLEXTALK, vous devez le brancher sur le secteur.

5.2. Extinction automatique.

Afin d'économiser l'énergie, PLEXTALK passe automatiquement en mode veille après 2 minutes d'inactivité, même si le niveau de charge de la batterie est bon.

S'il est branché au secteur ou à un périphérique USB, PLEXTALK passe en mode veille après 15 minutes d'inactivité.

5.3. Extinction forcée.

Si, pour une raison ou pour une autre, PLEXTALK ne s'éteint pas, ou si aucune touche du clavier ne fonctionne, essayez l'extinction forcée.

Pour activer l'extinction forcée de l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant plus de 10 secondes, PLEXTALK s'éteindra lorsque vous relâcherez la touche.

Note: Si cette procédure échoue et que le PLEXTALK est toujours allumé, débranchez l'adaptateur-secteur, retirez la batterie et insérez-la à nouveau dans l'appareil.

5.4. Fonction de mise en sommeil.

La fonction de mise en sommeil vous permet de définir un laps de temps au bout duquel PLEXTALK s'éteindra automatiquement.

5.4.1. Réglage de la mise en sommeil.

Pour régler le délai de mise en sommeil, procédez comme suit :

- Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt. PLEXTALK annonce "Mise en sommeil. 15 minutes. Effectué."
- Appuyez à nouveau brièvement sur la touche Marche/Arrêt pour augmenter le délai avant l'extinction. Le délai de mise en sommeil passe de 30 minutes à 45 minutes, une heure, une heure trente, deux heures, à chaque appui sur la touche.

5.4.2. Désactivation de la mise en sommeil.

Pour annuler la mise en sommeil automatique, procédez comme suit :

- Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt. PLEXTALK vous annonce que la mise en sommeil est activée, ainsi que le nombre de minutes restant avant l'extinction de l'appareil.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le PLEXTALK annonce "désactivé".

6. Fonctions de lecture communes à tous les formats.

PLEXTALK est compatible avec les formats suivant:

- Ouvrages DAISY
- Musique: MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ et Ogg Vorbis.
- Fichiers Texte: format texte seul, Microsoft Word .doc, .docx et format HTML.
- Livres Audio: Audible, MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ et Ogg Vorbis.
- Podcast
- Web radio

NOTE: Si un CD contient différents types de fichiers (par exemple un ouvrage Daisy et des fichiers audio), PLEXTALK ne reconnaîtra qu'un seul type de fichiers.

NOTE: Les fichiers de type WORD ou WMA stockés sur un CD ou un DVD connecté en USB, ne peuvent pas être lus.

6.1. Arrêt et reprise de la lecture.

Procédez comme suit pour démarrer et arrêter la lecture :

- Pour démarrer la lecture, appuyez sur la touche Lecture/Stop. PLEXTALK débute la lecture à la position lors de l'arrêt précédent.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche Lecture/Stop.

6.2. Avance ou recul rapides.

Le recul et l'avance rapides se font en utilisant les touches Gauche et Droite de part et d'autre de la touche Lecture/Stop.

- Pour effectuer un recul rapide, maintenez enfoncée la touche Gauche. La lecture reprend lorsque la touche est relâchée.
- Pour effectuer une avance rapide, maintenez enfoncée la touche Droite. La lecture reprend lorsque la touche est relâchée.

Pendant l'écoute d'un ouvrage DAISY ou d'un livre audio, lorsque les touches Gauche ou Droite sont maintenues enfoncées, le recul ou l'avance rapides passent 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes et ainsi de suite. Si la touche est relâchée avant l'annonce de "1 minute", la lecture reprend au point où la touche a été relâchée. Si la touche est relâchée après ce points, l'avance ou le recul

continue jusqu'à ce que la touche Lecture/Stop soit appuyée pour interrompre le processus.

Note: Il n'existe pas de fonction d'avance et de recul rapides pour les Web radios.

6.3. Modifier le volume.

Le volume est réglable, de 0 à 25, par pas de 1, 0 étant le mode silencieux, et 25 le volume le plus élevé. Le volume de l'assistance vocale est modifié en même temps que le volume de lecture.

- Pour augmenter le volume, poussez l'interrupteur vers le haut, par impulsions répétées pour monter le volume de 1 en 1, ou poussez et maintenez l'interrupteur vers le haut, jusqu'à ce que le volume désiré soit atteint.
- Pour diminuer le volume, tirez l'interrupteur vers le bas, par impulsions répétées pour baisser le volume de 1 en 1, ou tirez et maintenez l'interrupteur vers le bas, jusqu'à ce que le volume désiré soit atteint.

6.4. Modifier la vitesse de lecture.

11 valeurs, de -2 à +8, sont disponibles pour le réglage de la vitesse. La vitesse normale est à la position 0. La valeur -2 correspond à la moitié de la vitesse normale, +4 étant le double de la vitesse normale, +8 étant le triple.

- Pour accélérer la lecture, appuyez une fois sur la touche 1, puis sur la touche Haut.
- Pour ralentir la lecture, appuyez une fois sur la touche 1, puis sur la touche Bas.

NOTE : En maintenant les touches Haut ou Bas appuyées, le réglage de la vitesse se fait plus rapidement, ce qui évite d'avoir à appuyer à chaque fois sur la touche.

NOTE: La vitesse pour la diffusion des Web radios ne peut pas être modifiée.

6.5. Modifier la tonalité.

Le réglage de la tonalité se fait sur une échelle de 13 niveaux, de -6 à +6, par pas de 1.

- Pour choisir une tonalité plus aiguë, appuyez deux fois sur la touche 1, puis sur la touche Haut.
- Pour choisir une tonalité plus grave, appuyez deux fois sur la touche 1, puis sur la touche Bas.

NOTE : En maintenant les touches Haut ou Bas appuyées, le réglage de la tonalité se fait plus rapidement, ce qui évite d'avoir à appuyer à chaque fois sur la touche.

6.6. Modification du volume de l'assistance vocale.

Le volume de l'assistance vocale peut être modifié. 11 niveaux sont disponibles, de -5 à +5, de 1 en 1.

Pour ajuster le volume de l'assistance vocale, procédez comme suit:

- Appuyez trois fois sur la touche 1.
- Appuyez sur la touche Haut pour augmenter le volume, sur la touche Bas pour le diminuer.

Note: Lorsque le volume de lecture est modifié, le volume de l'assistance vocale est ajusté en même temps.

6.7. Modifier la vitesse de l'assistance vocale.

La vitesse de l'assistance vocale peut être modifiée indépendamment de la vitesse de lecture. 11 valeurs, de -2 à +8, sont disponibles pour le réglage de la vitesse.

Pour modifier la vitesse de l'assistance vocale, procédez comme suit:

- Appuyez quatre fois sur la touche 1.
- Appuyez sur la touche Haut pour augmenter la vitesse de l'assistance vocale, sur la touche Bas pour la diminuer.

6.8. Le menu de navigation.

L'une des fonctions les plus utiles du PLEXTALK est de pouvoir choisir le mode de déplacement.

Pour accéder au menu de navigation, procédez comme suit :

- Appuyez sur les touches Haut et Bas pour vous déplacer vers le haut ou le bas dans le menu de navigation. Les options annoncées sont celles qui sont disponibles en fonction de l'ouvrage en cours.
- Une fois le mode de déplacement sélectionné, utilisez les touches Gauche ou Droite pour vous déplacer respectivement en arrière et en avant.

- Par exemple, en choisissant l'option de navigation "niveau 1" avec les touches Haut et Bas, un appui sur les touches Gauche ou Droite permet ensuite de se déplacer au chapitre précédent ou suivant.

6.9. Sélection du support et de l'ouvrage.

À tout moment, il est possible de passer de la carte SD au support connecté en USB et vice versa. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche Livre plusieurs fois pour atteindre le support choisi. PLEXTALK passe de façon cyclique aux 3 options disponibles, "carte SD", "USB" et "mémos vocaux."
- Lorsque le support souhaité est annoncé, utilisez les touches Droite et Gauche pour parcourir les différents éléments contenus sur le support.
- Lorsque vous avez atteint l'élément que vous souhaitez écouter, appuyez sur la touche Lecture/Stop et la lecture reprend là où vous vous étiez arrêté lors de l'écoute précédente.

6.10. Navigation par ouvrage.

Dans le cas où plusieurs fichiers sont présents sur la carte SD ou sur le support USB, vous pouvez avoir besoin de passer de l'un à l'autre.

Vous pouvez écouter vos morceaux préférés en choisissant parmi les niveaux "catégories", "dossiers", "titres" ou "fichiers". Le niveau "catégories" regroupe "ouvrages DAISY", "Musique", "Fichiers Texte", "Livres Audio", "Podcast" et "Web radio".

Pour trouver un titre depuis le niveau de navigation par titre, procédez comme suit:

- Appuyez plusieurs fois sur la touche Ouvrage pour atteindre le support choisi.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour atteindre le niveau de navigation par titre, parmi "catégories" "dossiers" "titre" ou "fichier".
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour vous déplacer dans le niveau choisi.
- Si vous avez choisi le niveau "catégories" ou "dossiers", si le dossier ou la catégorie contient l'ouvrage ou l'album que vous souhaitez écouter, appuyez une ou deux fois sur la touche Bas pour atteindre le niveau "titre". PLEXTALK annonce "sélectionnez un titre", appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour sélectionner le titre choisi.
- Depuis les niveaux "titre" ou "fichier", vous pourrez retrouver facilement celui que vous cherchez.

- Pour écouter le titre ou le fichier sélectionné, appuyez sur la touche Lecture/Stop. La lecture reprend à l'endroit où vous aviez arrêté lors de l'écoute précédente.

Comment retrouver vos morceaux de musique favoris depuis les catégories

Depuis les catégories, vous pouvez définir un intervalle pour la diffusion, par "pistes", "albums", "dossiers", ou "toute la musique". Pour écouter de la musique par pistes, sélectionnez un morceau au niveau "Fichier", puis appuyez sur la touche Validation. Pour écouter de la musique par albums, sélectionnez un album au niveau "Ouvrages", puis appuyez sur la touche Validation. De même, Pour écouter de la musique par dossiers sélectionnez un dossier au niveau "Dossiers", puis appuyez sur la touche Validation. Une fois un dossier sélectionné au niveau "Dossiers" et l'appui sur Validation, tous les albums contenus dans ce dossier sont disponibles pour l'écoute. Pour écouter tous les morceaux de musique disponibles, deux solutions:

Sélectionnez "Musique" au niveau "Catégories" et appuyez sur la touche Validation.

Ou, sélectionnez "Toute la Musique" au niveau "Ouvrages" ou "Dossiers", et appuyez sur la touche Validation.

Vous pouvez choisir entre « répéter » ou « aléatoire » pour l'intervalle dans lequel vous avez appuyé sur Validation.

NOTE: La navigation par fichiers n'est disponible que dans les catégories "Musique" "Livres Audio" et "Podcast".

NOTE: Les livres audio au format Audible ne permettent pas une navigation par fichier.

6.11. Accéder directement à un titre

Pour atteindre un titre directement, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Ouvrage plusieurs fois pour sélectionner le support.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner le niveau "Catégories".
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour sélectionner la catégorie.
- Enfin, tapez le numéro du titre choisi, et appuyez sur la touche Validation.
- Appuyez à nouveau sur Validation pour démarrer la lecture.

6.12. Modifier l'ordre de tri des titres

Vous avez la possibilité de modifier le mode de tri des titres. Vous pouvez choisir entre "tous les titres", "titres récents" et "nouveaux titres".

- "Tous les titres": tous les dossiers et les titres sont affichés, triés par nom.
- "Titres récents": les titres sont triés par date d'écoute.
- "Nouveaux titres": les titres sont triés par date.

Pour écouter le titre lu en dernier, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Ouvrage.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche Aller À jusqu'à la liste des titres récents.
- Appuyez sur les touches Haut et Bas pour choisir en "Catégories" ou "Titres", puis sur les touches Gauche ou Droite pour choisir le titre à écouter. Appuyez ensuite sur la touche Lecture.
- Ou, sur le pavé numérique, tapez le numéro du titre et validez pour lancer le sélectionner. Appuyez à nouveau sur la touche Validation pour commencer la lecture.

NOTE: PLEXTALK mémorise jusqu'à 10 titres par catégorie.

6.13. Obtenir des informations sur le support et les fichiers.

Pour obtenir différentes informations sur le support et son contenu, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "gestion du support" et sélectionnez la en appuyant sur la touche Validation.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "information sur le support" et sélectionnez la en appuyant sur la touche Validation.
- PLEXTALK annonce diverses informations sur le support et l'ouvrage en cours.
- Lorsque vous avez pris connaissance de ces informations, appuyez sur la touche Validation pour sortir du menu.

6.14. Obtenir des informations sur le statut actuel.

Vous pouvez obtenir différentes informations sur l'état actuel, tels que le nombre de titres, de pages, de signets, etc. Que PLEXTALK soit ou non en cours de lecture, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche 5.
- Différentes informations sont annoncées.
- Si vous ne souhaitez pas écouter la totalité des informations et préférez vous déplacer rapidement dans la liste, il vous suffit d'appuyer sur la touche 5 autant de fois que nécessaire pour atteindre l'information qui vous intéresse.

- Lorsque vous avez entendu l'information utile, appuyez sur Validation pour interrompre la diffusion des suivantes.
- Appuyez sur la touche 5 et maintenez-la enfoncée pour entendre la date et l'heure.

6.15. Sélection du mode de lecture.

Pour sélectionner une option de lecture en boucle ou de répétition, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "paramètres de lecture" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Utilisez les touches Droite et Gauche pour atteindre l'option "paramètres de répétition et de lecture en boucle", et validez.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option souhaitée et sélectionnez la en appuyant sur Validation.

6.16. Utiliser les signets.

6.16.1. Les différents types de signets.

PLEXTALK gère 3 types de signets, définis comme suit :

- Les signets numérotés : vous pouvez insérer jusqu'à 10000 signets. Chaque signet porte un numéro unique, entre 1 et 65000.
- Les signets vocaux – Il s'agit de signets numérotés auxquels un message vocal est associé. Les signets vocaux utilisent la mémoire interne. 30 minutes environ sont disponibles pour l'enregistrement des annotations vocales des signets. Lorsque cette limite est atteinte, le signet vocal le plus ancien est effacé et remplacé par le dernier créé.
- Les signets automatiques – Dans chaque ouvrage, chaque album et chaque fichier texte, un signet est automatiquement créé lorsque la lecture est arrêtée, et permet de reprendre la lecture à cette position lors de la prochaine écoute. Les signets automatiques sont insérés par PLEXTALK, dès que vous changez de titre, de support ou de fichier-texte, et lorsque vous éteignez l'appareil. Vous n'avez pas à vous en soucier, cela se fait automatiquement.

NOTE : PLEXTALK mémorise la dernière position de lecture pour un maximum de 1000 ouvrages, fichiers audio ou fichiers-texte.

6.16.2. Insérer des signets.

Pour insérer un signet numéroté, que PLEXTALK soit ou non en cours de lecture, procédez comme suit :

- Appuyez deux fois sur la touche Signet.
- Sur le pavé numérique, tapez le numéro que vous souhaitez attribuer au nouveau signet. Si vous laissez PLEXTALK attribuer un numéro, n'entrez pas de nombre, ou tapez simplement 0 puis Validation.
- Appuyez sur Validation pour confirmer ou sur Annulation pour abandonner l'opération.

Note: Lorsque vous laissez PLEXTALK assigner les numéros, c'est le plus petit nombre pas encore utilisé qui est associé automatiquement.

Pour insérer un signet vocal, que PLEXTALK soit ou non en cours de lecture, procédez comme suit :

- Appuyez deux fois sur la touche Signet.
- Sur le pavé numérique, tapez le numéro que vous souhaitez attribuer au nouveau signet vocal. Si vous laissez PLEXTALK attribuer un numéro, n'entrez pas de nombre, ou tapez simplement 0 puis Validation.
- Appuyez sur la touche Enregistrement pour confirmer, ou sur Annulation pour abandonner.
- Appuyez sur la touche Enregistrement, et maintenez la enfoncée pendant l'enregistrement de l'annotation vocale.
- Relâchez la touche Enregistrement. PLEXTALK confirme la création du signet vocal.

6.16.3. Naviguer dans les signets.

Pour atteindre un signet numéroté ou un signet vocal, que PLEXTALK soit ou non en cours de lecture, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Signet.
- Sur le pavé numérique, tapez le numéro du signet choisi.
- Appuyez sur Validation pour confirmer ou sur Annulation pour abandonner.
- Si le numéro entré correspond bien à un signet, PLEXTALK s'y déplace et la lecture commence automatiquement.

Dès lors qu'un signet a été inséré dans un ouvrage, un album ou un texte, l'option de navigation par signet apparaît dans le menu de navigation. Pour vous déplacer de signet en signet, procédez comme suit :

- Utilisez les touches Haut ou Bas pour atteindre l'option "Signet" dans le menu de navigation.
- Appuyez sur la touche Gauche pour atteindre le signet portant le numéro inférieur. La lecture démarre automatiquement.
- Appuyez sur la touche Droite pour atteindre le signet portant le numéro supérieur. La lecture démarre automatiquement.

6.16.4. Effacer les signets.

Pour supprimer un signet numéroté, ou un signet vocal, la méthode est la même, procédez comme suit :

- Appuyez 3 fois sur la touche Signet.
- Sur le pavé numérique, tapez le numéro du signet à supprimer.
- Appuyez sur Validation pour confirmer, ou sur Annulation pour abandonner.
- Après la confirmation, PLEXTALK supprime le signet de l'ouvrage en cours, et un message est émis.

Pour supprimer tous les signets de l'ouvrage, de l'album ou du texte en cours, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "Signet" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "effacer tous les signets dans l'ouvrage en cours" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- PLEXTALK demande une confirmation. Appuyez sur Validation pour confirmer, un message de confirmation sera émis. Appuyez sur Annulation pour abandonner l'opération.

Note: Cette opération supprime tous les signets de l'ouvrage ou texte en cours, mais n'affecte pas les signets des autres ouvrages.

6.16.5. Activer et désactiver la lecture des signets vocaux.

Lors de l'utilisation des signets vocaux, vous pouvez choisir s'ils seront lus ou non automatiquement pendant l'écoute.

Pour activer et désactiver la lecture des signets vocaux, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "signet" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "paramètres de lecture pour les signets vocaux" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "signets vocaux activé" ou "signets vocaux désactivé" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.

6.17. Organisation et gestion des fichiers et des dossiers.

Lorsque le PLEXTALK accède à la carte SD ou à un support USB, son contenu est listé, et classé par types: "ouvrages DAISY", "Enregistrements", "Musique", "Textes", "Livres Audio", "Podcasts" et "Web Radio", sans tenir compte de l'endroit où ils sont stockés sur le support. Lorsque vous vous déplacez dans la liste des titres, ils sont automatiquement organisés, sans tenir compte de leur position physique sur le support.

Par exemple, si 3 fichiers texte sont stockés à la racine, et 2 dans un dossier, PLEXTALK annoncera 5 fichiers texte dans 2 dossiers.

Lorsque le support contient différents types de fichiers, DAISY, audio ou texte, ils seront automatiquement regroupés et triés, par type et par nom.

7. Lecture des ouvrages DAISY.

Ce chapitre décrit les fonctions spécifiques à la lecture des ouvrages DAISY.

7.1. Naviguer par titre.

Deux modes de navigation par titre sont disponibles dans un ouvrage DAISY. Vous pouvez, soit vous déplacer directement au titre, par son numéro, soit vous déplacer en avant et en arrière de titre en titre.

Pour accéder directement à un titre, procédez comme suit :

- Appuyez deux fois sur la touche Aller À.
- Sur le pavé numérique, tapez le numéro du titre que vous souhaitez atteindre.
- Appuyez sur Validation pour confirmer ou sur Annulation pour abandonner l'opération.

Pour se déplacer séquentiellement de titre en titre, procédez comme suit :

- Utilisez les touches Haut et Bas pour atteindre le niveau de navigation, par exemple Niveau 1, Niveau 2, etc.
- Appuyez sur la touche Gauche pour atteindre le titre précédent à ce niveau.
- Appuyez sur la touche Droite pour atteindre le titre suivant à ce niveau.

NOTE : Dans ce mode de navigation, PLEXTALK se déplace aux titres ayant le niveau choisi ou un niveau supérieur. Par exemple, si vous avez choisi le niveau 3, PLEXTALK s'arrêtera sur les titres de niveau 3, 1 et 2 lors des déplacements en arrière et en avant.

7.2. Atteindre le début ou la fin de l'ouvrage.

Pour atteindre le début d'un ouvrage DAISY, procédez comme suit :

- Appuyez deux fois sur la touche ALLER À.
- Appuyez sur la touche Validation, la position de lecture est alors ramenée au début de l'ouvrage, le message "début de l'ouvrage" le confirme.

Pour atteindre la fin d'un ouvrage DAISY, procédez comme suit :

- Appuyez deux fois sur la touche ALLER À.

- Appuyez sur la touche 0 puis sur Validation, la position de lecture est alors ramenée à la fin de l'ouvrage, le message "fin de l'ouvrage" le confirme.

7.3. Naviguer par page

La navigation par page ressemble beaucoup à la navigation par titre.

Pour accéder directement à une page, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche Aller À.
- Sur le pavé numérique, tapez le numéro de la page souhaitée.
- Appuyez sur Validation pour confirmer ou sur Annulation pour abandonner l'opération.

Pour se déplacer séquentiellement de page en page, procédez comme suit :

- Utilisez les touches Haut et Bas pour atteindre l'option "page" du menu de navigation.
- Appuyez sur la touche Gauche pour atteindre la page précédente.
- Appuyez sur la touche Droite pour atteindre la page suivante.

NOTE : Si aucune page n'est définie dans l'ouvrage, l'option "page" n'apparaît pas dans le menu de navigation.

7.4. Naviguer par groupe.

Pour passer de groupe en groupe en avant ou en arrière, procédez comme suit :

- Utilisez les touches Haut et Bas pour atteindre l'option "Groupe" du menu de navigation.
- Appuyez sur la touche Gauche pour atteindre le groupe précédent.
- Appuyez sur la touche Droite pour atteindre le groupe suivant.

NOTE : Si aucun groupe n'est défini dans l'ouvrage, l'option "groupe" n'apparaît pas dans le menu de navigation.

7.5. Naviguer par phrase

Pour vous déplacer en arrière ou en avant par phrase, procédez comme suit:

- Pour passer à la phrase précédente, sélectionnez l'option "groupe de mots" dans le menu de navigation à l'aide des touches Haut et Bas, et appuyez ensuite sur la touche Gauche.
- Pour passer à la phrase suivante, sélectionnez l'option "groupe de mots" dans le menu de navigation à l'aide des touches Haut et Bas, et appuyez ensuite sur la touche Droite.

7.6. Sauts dans le temps, par 30 secondes ou par 10 minutes

Pour des déplacements dans le temps, par 30 secondes ou par 10 minutes, procédez comme suit:

- Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner "10 minutes" ou "30 secondes".
- Pour avancer de 10 minutes ou de 30 secondes, appuyez sur la touche Droite.
- Pour reculer de 10 minutes ou de 30 secondes, appuyez sur la touche Gauche.

7.7. Naviguer par écran, paragraphe, ligne, phrase, épeler, mot ou caractère, dans les ouvrages Daisy texte.

En plus des options habituelles de navigation, les ouvrages Daisy en mode texte permettent les niveaux de navigation suivants: "écran", "paragraphe", "ligne", "phrase", "épeler", "mot" et "caractère". Ces options apparaissent dans le menu de navigation dès qu'on accède à ce type d'ouvrages.

Pour choisir l'une de ces options de navigation, la procédure est la même, comme décrite ci-dessous:

- Choisissez le niveau de navigation à l'aide des touches Haut et Bas, c'est-à-dire "écran", "paragraphe", "ligne", "phrase", "épeler", "mot" ou "caractère".
- Appuyez sur la touche Gauche pour vous déplacer en arrière d'un élément.
- Appuyez sur la touche Droite pour vous déplacer en avant d'un élément.

NOTE : L'option "écran" correspond à 40 lignes de texte.

NOTE : L'option "épeler" lit le mot, puis l'épelle.

7.8. Navigation par pourcentage.

Il est possible de se déplacer par pourcentage dans le fichier. Pour naviguer par pourcentage, procédez comme suit :

- Appuyez trois fois sur la touche Aller À.
- Tapez un pourcentage entre 0 et 100, et validez.
- PLEXTALK se déplace à la position choisie.

7.9. Modes de lecture.

Pendant l'écoute d'ouvrages DAISY, vous pouvez choisir entre les deux modes de lecture suivants:

- Lecture standard : La lecture se fait automatiquement du début à la fin de l'ouvrage, et s'arrête lorsque celle-ci est atteinte.
- Répétition de l'ouvrage : l'ouvrage en cours de lecture est répété, jusqu'à un appui sur la touche Lecture/Stop.

7.10. Paramétrages pour l'écoute des ouvrages DAISY multimédia

Les ouvrages DAISY multimédia contiennent à la fois de l'audio et des fichiers texte. PLEXTALK permet de choisir ce qui doit être lu lors de l'écoute de tels ouvrages.

- Sélectionnez un ouvrage DAISY multimedia.
- Appuyez sur la touche Menu.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour choisir l'option "paramètres de lecture", et validez.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour choisir l'option "Paramètres de lecture des ouvrages DAISY multimédia", et validez.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour choisir entre "audio" et "texte" et validez.

8. Lecture des enregistrements

Les ouvrages DAISY du dossier "Plexrecording" sont regroupés dans la catégorie "Enregistrements".

Les enregistrements réalisés avec le PLEXTALK sont stockés automatiquement dans ce dossier "PlexRecording".

La procédure de lecture de ces enregistrements est similaire à l'écoute des ouvrages DAISY classiques.

NOTE : Si vous sauvegardez un enregistrement de la carte SD vers un support USB, il sera automatiquement sauvegardé dans le dossier "PlexBackup" sur le support USB. De ce fait, l'ouvrage sauvegardé fera ensuite partie de la catégorie "Ouvrages DAISY" et non plus "Enregistrements".

9. Écoute de fichiers audio et de CDs musicaux.

Ce chapitre décrit les fonctions spécifiques à la lecture des fichiers audio et des CDs musicaux.

PLEXTALK peut diffuser les types de fichiers suivants:

- Les fichiers MP3: MPEG1 Layer 3 de 32kbps à 320kbps et MPEG2 Layer 3 de 16kbps à 160kbps.
- Les fichiers WAVE.
- Les fichiers WMA: PLEXTALK n'est pas compatible avec les fichiers WMA protégés par DRM.
- Les fichiers AMR-WB+.
- Les fichiers OGG VORBIS: de 45KBPS à 320KBPS.

ATTENTION : PLEXTALK n'est compatible qu'avec les CDs musicaux au standard CD-Digital Audio (CD-DA). Certains CDs protégés contre la copie ne sont pas compatibles avec le standard CD-DA, et risquent de ne pas pouvoir être lus par PLEXTALK.

NOTE : PLEXTALK ne permet pas d'éditer ou d'enregistrer des fichiers audio, que ce soit sur la carte SD ou sur un support externe.

NOTE : La lecture de fichiers au format WMA sur les supports USB, CD ou DVD externes, est impossible.

9.1. Naviguer par piste.

Il est possible d'atteindre directement une piste par son numéro, ou de se déplacer de piste en piste.

Pour atteindre une piste directement, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche ALLER À.
- Sur le pavé numérique, tapez le numéro de la piste souhaitée.
- Appuyez sur Validation pour confirmer ou sur Annulation pour abandonner l'opération.

Pour se déplacer séquentiellement de piste en piste, procédez comme suit :

- Utilisez les touches Haut et Bas pour atteindre l'option "piste" du menu de navigation.
- Appuyez sur la touche Gauche pour atteindre la piste précédente.
- Appuyez sur la touche Droite pour atteindre la piste suivante.

NOTE : Lors du déplacement de piste en piste, si la lecture de la piste dure plus de 3 secondes et que vous appuyez sur la touche Gauche, la lecture reprend au début de la piste en cours. Il faut alors appuyer à nouveau sur la touche Gauche avant les 3 premières secondes de lecture pour atteindre le début de la piste précédente.

9.2. Naviguer par album.

Il est possible d'atteindre directement un album par son numéro, ou de se déplacer d'album en album.

Pour atteindre un album directement, procédez comme suit :

- Appuyez deux fois sur la touche ALLER À.
- Sur le pavé numérique, tapez le numéro de l'album souhaité.
- Appuyez sur Validation pour confirmer ou sur Annulation pour abandonner l'opération.

Pour se déplacer d'album en album séquentiellement, procédez comme suit :

- Utilisez les touches Haut et Bas pour atteindre l'option "album" du menu de navigation.
- Appuyez sur la touche Gauche pour atteindre l'album précédent.
- Appuyez sur la touche Droite pour atteindre l'album suivant.

9.3. Déplacements de 10 minutes ou de 30 secondes

Pour un déplacement par pas de 10 minutes ou de 30 secondes, procédez comme suit:

- Appuyez sur les touches HAUT ou BAS pour choisir entre "10 minutes" et "30 secondes".
- Pour avancer, de 10 minutes ou de 30 secondes, appuyez sur la touche DROITE.
- Pour reculer, de 10 minutes ou de 30 secondes, appuyez sur la touche GAUCHE.

9.4. Modes de lecture.

Pendant l'écoute de fichiers audio, il est possible de choisir entre différents modes de lecture. Les options suivantes sont disponibles :

- Lecture Standard: La lecture se fait automatiquement du début à la fin de l'album, et s'arrête lorsque celle-ci est atteinte.
- Répétition de la piste : la piste en cours de lecture est répétée jusqu'à un appui sur la touche Lecture/Stop.
- Répétition de l'album : l'album en cours de lecture est répété jusqu'à un appui sur la touche Lecture/Stop.
- Répétition de tous les albums : tous les morceaux compris dans l'intervalle défini au niveau de navigation par titre sont répétés.
- Répétition aléatoire : tous les morceaux compris dans l'intervalle défini au niveau de navigation par titre sont diffusés au hasard.

9.5. Annonce des pistes ou des albums par leur nom ou leur numéro.

Lors de la navigation par piste ou par album, PLEXTALK annonce soit leur numéro, soit leur nom.

Il est possible de choisir entre l'annonce de l'une ou l'autre de ces informations.

Pour ce faire, procédez comme suit:

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "Paramètres de lecture" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "Lecture du nom du fichier audio en cours" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Avec les touches Droite et Gauche, choisissez entre "lecture du nom du fichier audio" et "lecture du numéro de la piste audio", et validez.

9.6. À propos de l'ordre de lecture.

Ce chapitre contient les informations relatives à l'ordre de lecture des fichiers audio.

- Lecture des fichiers : Les fichiers seront lus en suivant l'ordre alphabétique de leur nom.
- Lecture des dossiers : Si la carte SD ou le support USB contient plus d'un dossier, les fichiers qu'ils contiennent seront lus dans l'ordre alphabétique des noms de dossiers.

9.7. Restrictions pour les fichiers audio.

Limite pour le nombre de dossiers et de fichiers:

- Le nombre maximum de fichiers pouvant être stockés dans le même dossier est de 1024. Les fichiers supplémentaires ne sont pas reconnus.
- Le nombre maximum de fichiers pouvant être stockés sur un même support est de 6000. Les fichiers supplémentaires ne sont pas reconnus.
- Le nombre maximum de dossiers est de 1024, y compris la racine. Les dossiers supplémentaires ne sont pas reconnus.
- PLEXTALK considère les dossiers de fichiers comme des albums, et reconnaît jusqu'à 8 niveaux hiérarchiques.
- Lorsqu'un dossier contient un ouvrage DAISY, PLEXTALK n'explore pas ses éventuels sous-dossiers.

NOTE : PLEXTALK mettra plus de temps pour lire les informations lorsque la carte SD ou le support en USB contient un grand nombre de dossiers.

10. Lecture des fichiers-texte.

PLEXTALK permet l'écoute de fichiers texte, grâce à la synthèse vocale intégrée. PLEXTALK gère les formats de fichiers suivants:

- Fichier en texte seul
- Fichiers Microsoft Word .doc, .docx
- Fichiers HTML

NOTE : Il n'est pas possible de lire les fichiers au format WORD stockés sur un CD ou un DVD connecté en USB.

10.1. Naviguer par écran, paragraphe, ligne, phrase, épeler, mot ou caractère.

Dans les fichiers au format texte, vous disposez des modes de navigation suivants: par écran, paragraphe, ligne, phrase, épeler, mot ou caractère. Ces options apparaissent automatiquement dans le menu de navigation dès lors que vous lisez un fichier-texte. Pour les fichiers WORD ou HTML dans lesquels des titres ont été définis, une option supplémentaire apparaît dans le menu de navigation et permet de passer de l'un à l'autre. C'est l'option "niveau".

La procédure est la même pour chacune de ces options, comme suit :

- Choisissez le niveau de navigation à l'aide des touches Haut et Bas, c'est-à-dire "écran", "paragraphe", "ligne", "phrase", "épeler", "mot" ou "caractère".
- Appuyez sur la touche Gauche pour reculer dans le texte selon le mode choisi.
- Appuyez sur la touche Droite pour avancer dans le texte selon le mode choisi.

NOTE : L'option "écran" correspond à 40 lignes.

NOTE : L'option "épeler" lit le mot, puis l'épelle.

10.2. Navigation par pourcentage.

La navigation par pourcentage est possible à l'intérieur des fichiers texte. Pour naviguer par pourcentage, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche Aller À.
- Tapez un pourcentage entre 0 et 100, et validez.
- PLEXTALK se déplace à l'endroit désigné dans le texte.

10.3. Modes de lecture.

Pendant l'écoute de fichiers-texte, vous pouvez choisir entre les deux modes de lecture suivants:

- Lecture standard : La lecture se fait automatiquement du début à la fin du fichier, et s'arrête lorsque celle ci est atteinte
- Répétition de l'ouvrage : le fichier en cours de lecture est répété, jusqu'à un appui sur la touche Lecture/Stop.

11. Lecture de livres audio.

PLEXTALK est compatible avec les livres audio.

Les formats suivants sont gérés:

- Fichiers ".aa" provenant d'Audible.
- Fichiers MP3, WMA, WAVE, AMR, et Ogg.

Créez un dossier nommé "Audible" à la racine de la carte SD et copiez-y les fichiers .AA provenant d'Audible. Si des fichiers audio, d'un autre type que .AA, sont stockés dans ce dossier "Audible", ils ne seront pas reconnus par le PLEXTALK. PLEXTALK gère un fichier « .aa » comme un ouvrage. De ce fait, ils sont accessibles au niveau de navigation par ouvrage, mais pas par fichier.

Il est conseillé de créer un dossier "PlexAudioBook" à la racine de la carte SD, et d'y copier les livres audio d'un format différent de .AA.

Les livres audio stockés dans ce dossier seront alors considérés comme des ouvrages, non comme de la musique. PLEXTALK gère chaque dossier du dossier « PlexAudioBook » comme un ouvrage.

NOTE: PLEXTALK identifie les fichiers .AA stockés dans d'autres dossiers en tant que fichiers AUDIBLE. Cependant, il est préférable de les sauvegarder directement dans le dossier "Audible".

NOTE: PLEXTALK ne reconnaît pas les fichiers .AA sauvegardés dans le dossier "PlexAudioBook".

La navigation dans les livres audio est identique à celle des fichiers musicaux. Reportez-vous au chapitre 9 "Écoute de fichiers audio et de CDs musicaux" pour plus de détails.

NOTE: Dans les fichiers .AA, la navigation par titre et par pourcentage est disponible.

NOTE: Deux modes de lecture sont proposés: "lecture standard" et "répétition de l'ouvrage".

12. Podcast

Le podcast est une technologie "dynamique" qui permet d'accéder à différents contenus (musique ou autres), en se connectant à des sites Web. Dès que vous aurez ajouté un podcast à votre liste, vous pourrez obtenir la mise à jour et le téléchargement des nouveaux contenus. Les fichiers audio issus d'un podcast sont nommés "épisodes".

NOTE: reportez-vous au chapitre 20 "paramètres réseau" pour plus de détails sur le paramétrage réseau.

NOTE: Le PLEXTALK ne gère que des épisodes de podcast au format audio.

12.1. Ajouter un podcast dans le PLEXTALK

Avant de pouvoir écouter les épisodes d'un podcast, vous devez au préalable l'ajouter manuellement à la liste. Avant tout, vous devez créer un fichier avec l'extension "opml" (auquel nous ferons maintenant référence comme "fichier opml"). Vous pouvez le créer sur votre ordinateur, et y ajouter vos podcasts préférés. Ensuite, créez le dossier "PlexPodcast" à la racine de la carte SD.

Deux méthodes permettent de créer un fichier Opml.

< Utiliser l'application disponible sur le site PLEXTALK. >

Vous pouvez télécharger cette application, et son manuel, qui contient toutes les informations nécessaires à la création d'un fichier Opml.

< Via une application telle que iTunes. >

Vous pourrez exporter le fichier Opml depuis une application spécifique, telle qu'iTunes. Pour plus de détails concernant l'exportation d'un fichier Opml, reportez-vous au manuel de l'application que vous utilisez.

12.2. Première écoute d'un podcast.

Pour télécharger et écouter un podcast pour la première fois, procédez comme suit:

- Insérez la carte SD sur laquelle vous avez sauvegardé un fichier Opml dans votre PLEXTALK.
- Appuyez sur la touche Ouvrage pour sélectionner "carte SD".

- Appuyez sur les touches Haut et Bas pour choisir "catégorie", puis sur les touches Gauche ou Droite pour choisir "podcast".
- Appuyez sur la touche Bas pour choisir "titre", puis sur les touches Gauche ou Droite pour choisir le podcast. Appuyez enfin sur Validation.
- Un message vous demande de confirmer le téléchargement de la liste des épisodes, qui n'existe pas encore. Procédez à la mise à jour de la liste en appuyant sur la touche Validation.
- Choisissez un épisode dans la liste, et appuyez sur la touche Lecture/Stop.
- Un message demande de confirmer le téléchargement de l'épisode. Appuyez sur Validation pour le télécharger.
- Le téléchargement prend un certain temps. Lorsqu'il est effectué, appuyez sur Lecture:Stop pour débiter l'écoute.

NOTE: Reportez-vous au paragraphe 12.7 "Informations pendant le téléchargement" pour plus de détails.

12.3. Écoute des podcasts

Pour écouter des podcasts pour lesquels la liste des épisodes a déjà été chargée, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Ouvrage pour sélectionner "carte SD".
- Sélectionnez Podcast à l'aide des touches Droite ou Gauche, puis validez.
- Choisissez un épisode à l'aide des touches Gauche et Droite. Pour mettre à jour la liste des épisodes, choisissez "mise à jour de la liste des épisodes" dans le menu Podcast. Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe 12.5 "Obtenir la liste des épisodes récents".
- Appuyez sur Lecture/Stop pour écouter l'épisode sélectionné. Si l'épisode est déjà téléchargé, il est immédiatement diffusé. S'il est en cours de téléchargement, un message l'indique. S'il n'a pas encore été téléchargé, une confirmation est demandée avant de procéder au téléchargement. Appuyez sur la touche Validation pour confirmer, sur Annulation pour refuser.

12.4. Navigation par épisode, par 10 minutes ou 30 secondes.

Vous savez déjà sélectionner un épisode. Mais vous pouvez également vous déplacer à l'intérieur d'un épisode, par pas de 10 minutes ou de 30 secondes.

- Appuyez sur les touches Haut et Bas pour choisir entre la navigation par épisode, par 10 minutes ou par 30 secondes.
- Si vous avez choisi "épisode", appuyez sur la touche Droite pour passer à l'épisode suivant. Appuyez sur la touche Gauche pour passer à l'épisode précédent.
- Si vous avez sélectionné "10 minutes" ou "30 secondes", appuyez sur la touche Droite pour avancer dans le temps, de 10 minutes ou de 30 secondes. Appuyez sur la touche Gauche pour reculer de 10 minutes ou de 30 secondes. Dans les deux cas, la position de lecture ne sort pas de l'épisode en cours.

NOTE: Les fonctions d'avance et de recul rapides sont également limités à l'épisode en cours.

12.5. Obtenir la liste des épisodes récents.

Vous pouvez vous connecter au site Web du podcast sélectionné et obtenir la liste des épisodes récents, en choisissant l'option "liste des épisodes récents" du menu Podcast

- Sélectionnez le podcast à mettre à jour, à l'aide de la touche Ouvrage.
- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option Podcast avec les touches Droite ou Gauche, et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "mise à jour de la liste des épisodes" à l'aide des touches Droite ou Gauche, et appuyez sur Validation.
- Un message de confirmation est annoncé. Appuyez sur Validation pour procéder à la mise à jour de la liste des épisodes. Une fois la mise à jour terminée, vous pourrez sélectionner les nouveaux épisodes dans la liste des épisodes récents.

12.6. Télécharger tous les épisodes d'un podcast.

Vous pouvez facilement télécharger tous les épisodes d'un podcast.

- Sélectionnez un podcast en appuyant sur la touche Ouvrage.
- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "Podcast" à l'aide des touches Droite ou Gauche, puis validez.
- Sélectionnez l'option "Récupérer tous les épisodes du podcast" à l'aide des touches Droite ou Gauche, puis validez.
- Un message de confirmation est annoncé.

- Appuyez sur Validation pour télécharger, dans un premier temps, la liste des épisodes. Ensuite, tous les épisodes seront téléchargés en une seule opération.

NOTE: Reportez-vous au paragraphe 12.7 "Informations pendant le téléchargement" pour plus de détails.

12.7. Informations pendant le téléchargement.

- Le téléchargement des listes des épisodes, et des épisodes eux-mêmes, peut prendre un certain temps. Cependant, vous pouvez utiliser le PLEXTALK pour écouter autre chose pendant ce temps. Sélectionnez un autre contenu avec la touche Ouvrage.
- Pour vérifier l'état d'avancement du téléchargement, appuyez sur la touche 5. Vous pourrez ainsi savoir combien il reste d'épisodes à récupérer.
- Si vous éteignez l'appareil pendant le téléchargement, celui-ci sera interrompu. Pour reprendre le téléchargement, il faut relancer la procédure.

13. Web radio

Le PLEXTALK vous permet d'écouter des Web radios, en vous connectant à différents sites. Pour cela, vous devrez ajouter l'adresse URL du site de la radio à la liste de lecture, avant de lancer l'écoute en direct (streaming).

13.1. Ajouter des stations de Web radio à la liste de lecture.

Pour écouter une web radio, il faut que celle-ci ait d'abord été enregistrée. Pour ce faire, vous devez créer, sur votre ordinateur, un fichier contenant l'adresse URL de la station de radio, fichier d'extension ".pls", ".m3u", ou ".asx". Créez ensuite, à la racine de la carte SD, un dossier "PlexWebRadio", et copiez le fichier créé dans ce dossier. Pour rajouter une station, répétez l'opération, en copiant tous les fichiers dans ce dossier.

NOTE: Vous pourrez trouver des fichiers contenant les adresses des web radios, sur des sites spécialisés tels que "ShoutCast". <http://www.shoutcast.com>

13.2. Écouter une Web radio

Pour écouter une Web radio, procédez comme suit:

- Appuyez sur Ouvrage pour sélectionner la carte SD.
- Sélectionnez "catégorie" à l'aide des touches Haut et Bas, puis "Webradio" à l'aide des touches Droite et Gauche.
- Appuyez sur la touche Bas pour sélectionner "titre" puis sur les touches Droite et Gauche pour sélectionner la radio à écouter. Enfin, appuyez sur la touche Lecture/Stop pour écouter la radio en direct.

NOTE: Pendant l'écoute des radios sur Internet, aucune fonction de navigation, ou de déplacement rapide, n'est disponible.

NOTE: L'insertion de signets n'est pas possible pour les Web radios.

Si vous écoutez une autre station, ou si vous changez de support, il n'est pas possible de revenir automatiquement à la radio précédemment écoutée.

NOTE: Reportez-vous à l'annexe consacrée aux formats compatibles pour plus d'informations sur les web radios.

14. Enregistrer un ouvrage DAISY.

PLEXTALK peut enregistrer des ouvrages au format DAISY sur la carte SD. Ce chapitre décrit les méthodes et les paramètres d'enregistrement.

NOTE: Les mémos vocaux et les signets vocaux sont, quant à eux, enregistrés dans la mémoire interne du PLEXTALK. Reportez-vous aux paragraphes 6.16 "Utiliser les signets" et 17 "Les fonctions MÉMO du PLEXTALK", pour plus de détails sur les signets et les mémos vocaux.

14.1. Informations de base pour enregistrer avec PLEXTALK.

Avant d'enregistrer avec votre PLEXTALK, les notions détaillées ci dessous doivent être bien claires pour vous :

- PLEXTALK ne peut enregistrer directement sur un support connecté en USB.
- PLEXTALK enregistre exclusivement au format DAISY.
- Les enregistrements réalisés avec le PLEXTALK sont sauvegardés dans le dossier "PlexRecordings" de la carte SD.

14.2. Matériel pour l'enregistrement.

PLEXTALK est fourni avec les accessoires de base permettant un premier enregistrement vocal. Cependant, vous pouvez vous équiper d'accessoires supplémentaires pour améliorer la qualité sonore de vos enregistrements, ou pour enregistrer depuis d'autres appareils, tels que magnétophones, lecteurs de CDs, téléviseurs ou postes de radio. Voici une liste des accessoires dont vous aurez besoin :

- Une carte SD – Vous pouvez enregistrer et modifier les enregistrements directement sur carte SD.
- Un micro externe (éventuellement) – Des micros dynamiques, préamplifiés et stéréo peuvent être utilisés. Choisissez un micro équipé d'une prise jack de 3,5 millimètres.

ATTENTION : Lorsque vous utilisez un micro alimenté, veillez à utiliser une alimentation compatible et à respecter les précautions d'emploi, au risque de l'endommager. Reportez vous au mode d'emploi du micro.

- Un câble Audio (éventuellement) – Si vos appareils disposent des prises nécessaires, vous pouvez les relier au PLEXTALK par un câble équipé à chaque extrémité d'une prise mini jack stéréo de 3,5 millimètres, et enregistrer ainsi en direct depuis un magnétophone, un lecteur de CDs, un poste de radio ou tout autre appareil compatible.
- Un casque – Vous pouvez utiliser tous les casques équipés d'une prise mini jack stéréo de 3,5 millimètres de diamètre.

14.3. Supports pour les enregistrements.

Les paragraphes suivants mettent l'accent sur les points importants à prendre en considération lors de l'enregistrement sur carte SD.

- Avec PLEXTALK et sur carte SD, vous pouvez enregistrer, modifier vos enregistrements, les effacer, autant de fois que vous le souhaitez.
- PLEXTALK accepte les cartes SD d'une capacité maximale de 32 gigaoctets. Avant d'acquérir une carte supplémentaire, assurez vous de sa compatibilité avec PLEXTALK. N'hésitez pas à contacter votre revendeur PLEXTALK qui vous conseillera utilement.

ATTENTION : Lorsque vous effacez une carte sur votre PC, assurez vous de bien avoir sélectionné "FAT 16" ou "FAT 32".

14.4. Les différents états d'enregistrement.

Pendant l'enregistrement, PLEXTALK passe par 3 étapes : "attente d'enregistrement", "pause", "enregistrement en cours".

- En attente d'enregistrement, il est possible de régler le niveau d'enregistrement, le mode et la qualité sonore. Aucun enregistrement n'est effectué à ce stade. La diode d'alimentation devient orange et clignote constamment.
- En pause, il est possible d'ajuster le niveau d'enregistrement, mais pas le mode ou la qualité sonore. Là encore, aucun enregistrement n'est effectué. La diode d'alimentation devient orange et clignote constamment.
- Pendant l'enregistrement, les données sont stockées sur la carte SD. Il est possible de modifier le niveau d'enregistrement, mais pas le mode ou la qualité sonore. La diode d'alimentation devient orange et est constamment allumée.

14.5. Techniques de base pour l'enregistrement.

Ce paragraphe résume ces procédures de base. Les étapes pour la création d'un ouvrage DAISY sont les suivantes :

- Insérez la carte SD sur laquelle vous souhaitez enregistrer, en vous assurant auparavant qu'elle n'est pas verrouillée.
- Si nécessaire, branchez et sélectionnez la source externe.
- Appuyez une fois sur la touche Enregistrement pour passer en mode "attente d'enregistrement".
- Sélectionnez l'ouvrage dans lequel vous souhaitez insérer le nouvel enregistrement.
- Ajustez le niveau d'enregistrement, soit manuellement, soit en utilisant la fonction "automatique".
- Appuyez à nouveau sur la touche Enregistrement pour débiter l'enregistrement.
- À tout moment, vous pouvez appuyer sur la touche Enregistrement pour passer en pause.
- Appuyez sur Enregistrement pour repasser en enregistrement.
- Appuyez sur Lecture/Stop pour arrêter l'enregistrement.

NOTE : Vous pouvez passer en pause autant de fois que vous en avez besoin.

14.6. Désactiver la synthèse vocale lors de l'enregistrement.

Pour augmenter la qualité de vos enregistrements, il est recommandé d'interrompre la synthèse vocale lors des enregistrements via le micro incorporé ou avec un micro externe. Ceci évite que l'on entende la synthèse vocale dans l'enregistrement. Vous disposez des trois méthodes suivantes pour désactiver la synthèse vocale :

- Mettez le volume à zéro – cette option est efficace pour les personnes voyantes qui voient les diodes, mais ne convient pas aux utilisateurs aveugles qui ont besoin de savoir s'ils sont en pause ou en enregistrement.
- Branchez un casque – ainsi, tout ce qui est émis par le PLEXTALK est diffusé dans le casque, et la synthèse vocale ne sera pas enregistrée par le micro.
- Désactivez l'assistance vocale pendant l'enregistrement PLEXTALK vous offre la possibilité de désactiver automatiquement l'assistance vocale pendant l'enregistrement. Dans ce mode, l'assistance vocale est interrompue pendant l'enregistrement, mais est réactivée en pause et lorsque l'enregistrement est arrêté.

Procédez comme suit pour désactiver et réactiver l'assistance vocale pendant l'enregistrement :

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "paramètres d'enregistrement", et confirmez en appuyant sur la touche Validation.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "activation-désactivation de l'assistance vocale pendant l'enregistrement", et confirmez en appuyant sur la touche Validation.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "assistance vocale activée" ou "assistance vocale désactivée", et confirmez en appuyant sur la touche Validation.

14.7. Connecter et sélectionner une source extérieure.

Pour l'enregistrement de conférences, lectures, concerts..., vous jugerez préférable d'utiliser un micro externe. Pour enregistrer directement depuis des appareils externes tels que lecteurs de cassettes ou de CDs, ou postes de radio, utilisez un câble adapté pour les connecter à l'entrée ligne.

Procédez comme suit pour connecter un micro externe ou une source en entrée ligne :

- Branchez le câble du micro ou le câble audio jack dans la prise combinée "micro externe/entrée ligne".
- PLEXTALK confirme la connection et annonce "mode micro" ou "mode entrée ligne".
- Si PLEXTALK annonce "mode micro", cela signifie que l'option "modification de la source audio externe" est réglée sur "micro".
- Si PLEXTALK annonce "mode entrée ligne", cela signifie que l'option est réglée pour une source externe en entrée ligne.
- Si vous avez branché un micro et que PLEXTALK annonce "mode entrée ligne", ou si vous avez connecté un câble audio et que PLEXTALK annonce "mode micro", vous devez changer le paramètre dans le menu. Voir plus loin dans ce chapitre pour plus de détails à ce sujet.

NOTE : PLEXTALK ne peut définir automatiquement si vous avez branché un micro ou une entrée ligne. La synthèse vous annonce simplement le paramètre actuel pour l'option "modification de la source audio externe".

Pour modifier la source externe, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "paramètres d'enregistrement" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.

- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "modification de la source audio externe" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour passer de l'option "mode micro" à "mode entrée ligne" et sélectionnez celle que vous souhaitez activer en appuyant sur Validation.

ATTENTION : Lorsque vous connectez la sortie ligne d'un lecteur de CDs à l'entrée ligne du PLEXTALK, il peut arriver que le son soit saturé, même si vous ajustez correctement le niveau d'enregistrement du PLEXTALK. Dans ce cas, reliez la sortie casque du lecteur CD à l'entrée ligne du PLEXTALK, et ajustez le volume du lecteur CDs en conséquence.

14.8. Sélectionner le mode d'enregistrement et la qualité sonore.

14.8.1. À propos des modes d'enregistrement et des qualités sonores.

PLEXTALK vous permet de choisir entre 6 modes d'enregistrement. En voici la liste :

- Par défaut – pour les enregistrements ordinaires, ou les enregistrements vocaux lorsque l'environnement sonore est calme.
- Conférence – pour les enregistrements tels que conférences, réunions, cours, lorsque l'environnement sonore risque d'être bruyant.
- Audio – pour les enregistrements depuis un appareil externe, un lecteur CD par exemple.
- Cassette analogique – pour enregistrer des cassettes audio.
- Radio – pour l'enregistrement des stations de radio.
- Personnalisé – si aucun des modes prédéfinis ne vous donne satisfaction, vous avez la possibilité de régler manuellement tous les paramètres d'enregistrement.

De plus, PLEXTALK vous permet de sélectionner différentes qualités sonores dans chacun des modes. En choisissant une qualité sonore plus élevée, vous réduisez le temps d'enregistrement disponible sur la carte SD. En choisissant une qualité inférieure, vous augmentez le temps d'enregistrement disponible, mais la qualité sonore est moins bonne.

Choisissez entre les qualités sonores suivantes :

- PCM 44.1kHz stéréo
- PCM 22.05kHz mono
- MP3 256kbps 44.1kHz stéréo
- MP3 128kbps 44.1kHz stéréo

- MP3 64kbps 44.1kHz mono
- MP3 32kbps 22.05kHz mono

Note: Les informations techniques concernant les modes d'enregistrement et la qualité sonore, sont détaillées à l'annexe D.

14.8.2. Sélectionner un mode d'enregistrement prédéfini.

Vous pouvez choisir le mode d'enregistrement et la qualité sonore avant ou après être passé en mode "attente d'enregistrement".

Pour sélectionner un mode d'enregistrement avant de passer en attente d'enregistrement, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "paramètres d'enregistrement" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "mode d'enregistrement" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre le mode que vous souhaitez activer et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- PLEXTALK vous propose alors de sélectionner la qualité sonore. Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour parcourir les différents choix et sélectionnez en un en appuyant sur Validation. PLEXTALK confirme la prise en compte du nouveau réglage.

Pour sélectionner un mode d'enregistrement après être passé en attente d'enregistrement, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche Enregistrement, PLEXTALK passe en attente d'enregistrement.
- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "mode d'enregistrement" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre le mode que vous souhaitez activer et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- PLEXTALK vous propose alors de sélectionner la qualité sonore. Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour parcourir les différents choix et sélectionnez en un en appuyant sur Validation. PLEXTALK confirme la prise en compte du nouveau réglage.
- Vous retournez alors en mode "attente d'enregistrement".

NOTE : Dans les deux cas, les options choisies restent actives tant que vous n'effectuez pas de nouvelles modifications.

14.8.3. Sélectionner le mode d'enregistrement personnalisé.

Lorsqu'on sélectionne le mode d'enregistrement "personnalisé", il faut ajuster ensuite les valeurs pour les 5 paramètres d'enregistrement, contrairement aux modes prédéfinis pour lesquels ces paramètres sont déjà réglés.

Pour régler le mode d'enregistrement personnalisé, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "paramètres d'enregistrement" et sélectionnez la en appuyant sur Validation ; comme décrit ci dessus, cette étape n'est pas nécessaire si vous effectuez le paramétrage depuis le mode "attente d'enregistrement".
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "mode d'enregistrement" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "personnalisé" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- PLEXTALK vous propose alors de sélectionner la qualité sonore. Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour parcourir les différents choix et sélectionnez en un en appuyant sur Validation.
- Vous devez ensuite sélectionner les valeurs pour chacun des 4 paramètres d'enregistrement.
- PLEXTALK annonce le premier paramètre. Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour parcourir les différents choix et sélectionnez en un en appuyant sur Validation.
- PLEXTALK annonce alors le paramètre suivant. Continuez ainsi jusqu'au paramètre "niveau de l'environnement sonore" qui est le dernier paramètre.
- Lorsque tous les paramètres sont réglés, PLEXTALK confirme l'opération, quitte le menu principal, et vous vous retrouvez là où vous étiez avant de procéder au réglage.

14.9. Sélectionner l'ouvrage dans lequel effectuer l'enregistrement.

Ce paragraphe décrit comment choisir d'enregistrer dans un ouvrage existant, ou dans un nouvel ouvrage.

Pour enregistrer dans un ouvrage existant, procédez comme suit :

- Déplacez vous à l'ouvrage choisi sur la carte SD, comme décrit précédemment, et arrêtez la lecture.
- Appuyez sur la touche Enregistrement pour passer en mode "attente d'enregistrement".
- Vous pouvez également choisir l'ouvrage après être passé en attente d'enregistrement, en appuyant sur les touches Gauche ou Droite.
- Appuyez à nouveau sur la touche Enregistrement pour débiter l'enregistrement. Une nouvelle section est créée à la fin de l'ouvrage en cours. Le nouvel enregistrement sera placé à la fin de l'ouvrage, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez dans l'ouvrage lorsque vous avez débuté l'enregistrement.

Pour enregistrer dans un nouvel ouvrage, vous pouvez soit créer un titre d'abord puis débiter l'enregistrement, soit créer le nouvel ouvrage pendant l'enregistrement. Ce paragraphe décrit la procédure de création d'un nouvel ouvrage pendant l'enregistrement.

Procédez comme suit pour créer un nouvel ouvrage pendant l'enregistrement :

- Appuyez sur la touche Enregistrement pour passer en attente d'enregistrement.
- Toujours en attente d'enregistrement, appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour parcourir les ouvrages présents sur la carte SD. En vous déplaçant ainsi, vous constaterez que PLEXTALK crée une option, "nouvel ouvrage".
- Sélectionnez la et appuyez sur la touche Enregistrement. PLEXTALK débute l'enregistrement dans ce nouvel ouvrage.

NOTE: Les nouveaux ouvrages sont automatiquement créés dans le dossier "PlexRecording".

14.10. Ajuster le niveau d'enregistrement.

Avant de commencer un enregistrement, il est important de s'assurer que le niveau d'enregistrement est correct.

PLEXTALK propose deux méthodes pour l'ajustement du niveau d'enregistrement. Vous pouvez choisir d'ajuster le niveau d'enregistrement manuellement, ou automatiquement.

Pour passer de l'ajustement automatique à l'ajustement manuel, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.

- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "paramètres d'enregistrement" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "contrôle automatique du gain" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour choisir entre "contrôle automatique du gain, activé" ou "contrôle automatique du gain, désactivé" et appuyez sur Validation.

NOTE : Si le contrôle automatique est activé, vous entendrez PLEXTALK annoncer "auto" régulièrement, lorsque vous serez en mode d'attente d'enregistrement.

Pour ajuster manuellement le niveau d'enregistrement, procédez comme suit :

- Désactivez le contrôle automatique comme décrit ci dessus. Par conséquent, l'ajustement manuel est activé. Le niveau d'enregistrement peut être réglé de 0 à 20, par pas de 1.
- Appuyez une fois sur la touche Enregistrement pour passer en attente d'enregistrement.
- Appuyez sur la touche Haut. À chaque appui sur cette touche, le niveau d'enregistrement augmente de 1.
- Appuyez sur la touche Bas. À chaque appui sur cette touche, le niveau d'enregistrement diminue de 1.
- Pour accélérer l'ajustement du niveau, vous pouvez maintenir la touche Haut ou Bas enfoncée. PLEXTALK augmente ou diminue le niveau jusqu'à ce que vous relâchiez la touche, ou que le niveau minimum ou maximum soit atteint.
- Lorsque le niveau est réglé, PLEXTALK annonce la nouvelle valeur, puis le message "faible", "bon" ou "élevé", indiquant ainsi que le niveau est trop faible, correct ou trop élevé. Faites en sorte que PLEXTALK annonce "bon" le plus souvent possible au cours de l'enregistrement, en fonction des variations du son.

NOTE : Si le niveau du retour est désactivé, vous n'entendrez pas les messages "faible", "bon" et "élevé".

NOTE : Il se peut que lors de l'enregistrement par l'entrée ligne avec le niveau automatique, la qualité sonore ne soit pas satisfaisante. Recommencez l'enregistrement en désactivant le contrôle automatique et en ajustant manuellement le niveau d'enregistrement.

14.11. Utiliser le niveau de retour.

Le niveau de retour n'est qu'un indicateur donné par PLEXTALK pour vous informer sur le niveau d'enregistrement (faible, bon, élevé ou automatique), vous devez ensuite ajuster le

niveau si nécessaire. Par défaut, le niveau de retour est activé lorsque vous entrez en attente d'enregistrement. Le niveau de retour est automatiquement désactivé dès que l'on passe en enregistrement.

Pour activer ou désactiver le niveau de retour pendant l'enregistrement, en attente d'enregistrement ou en pause, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche Livre.
- PLEXTALK annonce "niveau de retour activé" ou "niveau de retour désactivé".
- Chaque appui sur la touche Livre bascule entre "activé" ou "désactivé".

NOTE : Si l'assistance vocale pendant l'enregistrement a été désactivée, PLEXTALK n'annoncera pas l'appui sur les touches pendant cette opération. Si vous en avez besoin, nous vous recommandons de réactiver l'assistance vocale et d'utiliser un casque, afin que les messages concernant le niveau d'enregistrement ne soient pas captés par le micro.

14.12. Activer/désactiver le retour d'enregistrement.

PLEXTALK offre la possibilité d'écouter l'enregistrement en cours, ce qui vous permet d'ajuster au mieux les différents paramètres.

Il est possible d'activer ou de désactiver le retour en attente d'enregistrement, en pause, ou pendant l'enregistrement. Procédez comme suit :

- Branchez un casque stéréo dans la prise située sur le bord supérieur de l'appareil.
- Appuyez une fois sur la touche Signet pour désactiver le retour.
- Appuyez à nouveau sur la touche Signet pour réactiver le retour.

NOTE : Cependant, le casque n'est pas nécessaire lors d'un enregistrement depuis une source en entrée ligne.

NOTE : Dans tous les cas, PLEXTALK active le retour par défaut.

14.13. Obtenir des informations sur l'enregistrement.

Un appui sur la touche 5 vous permet d'accéder aux informations concernant le statut actuel de l'enregistrement.

NOTE : Si l'assistance vocale pendant l'enregistrement est désactivée, vous n'entendrez pas ces informations en enregistrement. Vous les entendrez cependant en attente d'enregistrement ou en pause.

15. Édition d'un ouvrage DAISY.

15.1. Gestion des marques de titres pendant l'enregistrement.

Les marqueurs de titre peuvent être insérés soit en pause, soit durant l'enregistrement. Les deux méthodes sont détaillées ci dessous :

- Pour insérer un marqueur de titre pendant l'enregistrement, appuyez une fois sur la touche Aller À. Le nouveau titre est immédiatement créé.
- Pour insérer un marqueur de titre en pause, appuyez une fois sur la touche Aller À. Le nouveau titre est créé dès que l'enregistrement reprend.
- Tant qu'on est encore en pause, il est possible d'annuler le titre précédemment inséré, en appuyant une seconde fois sur la touche Aller À.

NOTE : PLEXTALK numérote automatiquement les titres, de façon séquentielle, depuis le début de l'ouvrage.

15.2. Insérer un titre après l'enregistrement.

Pour insérer un titre après l'enregistrement, procédez comme suit :

- Déplacez vous dans l'ouvrage à l'endroit où vous souhaitez insérer le titre.
- Pendant la lecture, ou après l'avoir interrompue, appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "édition", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "créer un titre", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- PLEXTALK vous rappelle que vous êtes sur le point de créer un titre et vous demande d'ajuster la position.
- Vous entendez ensuite 3 secondes de l'enregistrement, en boucle.
- Ajustez la position exacte pour le nouveau titre, à l'aide des touches Gauche ou Droite.
- Ces touches vous permettent de vous déplacer en arrière et en avant, par dixième de seconde.

- Lorsque vous avez atteint la position exacte pour l'insertion du nouveau titre, appuyez sur Validation pour confirmer. PLEXTALK annonce alors que le nouveau titre est créé.

NOTE : Les titres sont renumérotés automatiquement depuis le début de l'ouvrage.

15.3. Annuler un titre après l'enregistrement.

Pour supprimer un titre une fois l'enregistrement terminé, procédez comme suit :

- Déplacez vous dans l'ouvrage à l'endroit où vous souhaitez supprimer le titre.
- Pendant la lecture, ou après l'avoir interrompue, appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "édition", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "annuler un titre", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- PLEXTALK demande alors de confirmer la suppression du titre. Appuyez sur Validation pour confirmer la suppression. PLEXTALK confirme la suppression du titre.

NOTE : Les titres restants sont automatiquement renumérotés depuis le début de l'ouvrage.

15.4. Effacer une ou plusieurs sections.

PLEXTALK permet d'effacer une ou plusieurs sections dans un ouvrage DAISY. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Déplacez vous au titre à partir duquel vous souhaitez effacer une ou plusieurs sections.
- Déplacez vous ensuite dans l'enregistrement à la position où débute la première section à effacer.
- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "édition", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "effacer la section", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- PLEXTALK vous invite à sélectionner la première section à effacer. Utilisez les touches Gauche ou Droite pour vous déplacer en avant ou en arrière dans

l'enregistrement au début de la première section à effacer, et confirmez en appuyant sur Validation.

- PLEXTALK vous invite alors à sélectionner la dernière section à effacer. Utilisez les touches Gauche ou Droite pour vous déplacer en avant ou en arrière dans l'enregistrement au début de la dernière section à effacer, et confirmez en appuyant sur Validation.
- Enfin, PLEXTALK vous demande de confirmer l'effacement, appuyez sur Validation, ou sur Annulation pour abandonner l'opération.

NOTE : Si vous ne souhaitez effacer qu'une section, appuyez sur Validation au même endroit pour définir la première et la dernière section à supprimer.

NOTE : Avec cette méthode, vous ne pouvez effacer que des sections contiguës. Pour des sections dispersées dans l'ouvrage, procédez individuellement pour chacune ou pour chaque groupe.

NOTE : PLEXTALK renumérote automatiquement les titres après l'effacement de sections.

16. Gestion des supports.

16.1. Effacer une carte SD.

PLEXTALK vous permet d'effacer une carte SD, autant de fois que nécessaire. Pour effacer une carte SD, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "gestion du supports", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "effacer la carte SD", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- PLEXTALK vous demande de confirmer le processus de formatage de la carte. Appuyez sur Validation pour continuer, sur Annulation pour abandonner.
- Si vous avez choisi de poursuivre, la procédure de formatage débute. PLEXTALK émet un message lorsque le formatage est terminé.

NOTE : Si vous effacez la carte SD, toutes les données qui s'y trouvent seront supprimées.

16.2. Créer un nouvel ouvrage.

Pour créer un nouvel ouvrage sur la carte SD sans passer en mode d'attente d'enregistrement, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "gestion du supports", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "créer un ouvrage", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- PLEXTALK vous invite à confirmer la création de l'ouvrage. Appuyez sur Validation pour confirmer, ou sur Annulation pour abandonner.

NOTE : Le nouvel ouvrage est automatiquement créé dans le dossier "PlexRecording".

16.3. Supprimer un ouvrage.

PLEXTALK vous permet d'effacer un ouvrage, sur la carte SD ou le support connecté en USB. Pour effacer un ouvrage, procédez comme suit :

- Sélectionnez l'ouvrage à effacer.
- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "gestion du supports", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "supprimer l'ouvrage sélectionné", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- PLEXTALK vous invite à confirmer la suppression de l'ouvrage. Appuyez sur Validation pour confirmer, ou sur Annulation pour abandonner.

16.4. Effacer un fichier.

Vous pouvez effacer de la musique, des livres audio, ou des épisodes de podcasts. Pour supprimer un fichier, procédez comme suit:

- Déplacez-vous au fichier à supprimer.
- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Appuyez sur les touches Droite ou Gauche pour atteindre l'option "gestion des supports", et sélectionnez-la en appuyant sur Validation.
- Appuyez sur les touches Droite ou Gauche pour atteindre l'option "supprimer un fichier", et sélectionnez-la en appuyant sur Validation.
- PLEXTALK vous demandera de confirmer l'effacement. Appuyez sur la touche Validation pour confirmer, sur Annulation pour abandonner.

16.5. Préparer un ouvrage pour l'édition.

Si vous avez déjà converti un ouvrage, ou souhaitez modifier un ouvrage DAISY reçu d'une autre source, vous devez au préalable le "préparer pour l'édition".

Pour préparer un ouvrage en vue de l'édition, procédez comme suit :

- Sélectionnez l'ouvrage à traiter.
- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "gestion du supports", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "préparation pour édition", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- PLEXTALK vous demande de confirmer l'opération. Pour continuer, appuyez sur Validation, ou sur Annulation pour abandonner.

- PLEXTALK émet des messages pendant la procédure, puis annonce qu'elle est terminée. Pour interrompre la procédure en cours de création de l'ouvrage, appuyez sur Annulation.

ATTENTION: Si le niveau de la batterie est trop faible, la procédure est interrompue. Avant tout, il est recommandé de brancher l'appareil sur le secteur avant de débiter la procédure.

NOTE: Lorsque vous aurez préparé un ouvrage pour l'édition, vous pourrez y ajouter des enregistrements, et l'éditer.

NOTE: Si vous appliquez la procédure de préparation pour l'édition à un ouvrage stocké dans la catégorie des ouvrages DAISY, il restera dans cette catégorie.

16.6. Créer un ouvrage DAISY compatible.

La procédure de création d'un ouvrage DAISY transforme un enregistrement fait avec le PLEXTALK en un ouvrage DAISY qui pourra être lu sur d'autres lecteurs, ou sur un PC avec un logiciel de lecture d'ouvrages DAISY.

Pour créer un ouvrage DAISY, procédez comme suit :

- Sélectionnez l'ouvrage à convertir.
- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "gestion du supports", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "créer le livre", et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- PLEXTALK vous demande de confirmer l'opération. Pour continuer, appuyez sur Validation, ou sur Annulation pour abandonner.
- PLEXTALK émet des messages pendant la procédure, puis annonce qu'elle est terminée. Pour interrompre la procédure en cours de création de l'ouvrage, appuyez sur Annulation.

ATTENTION: Si le niveau de la batterie est trop faible, la procédure est interrompue. Avant tout, il est recommandé de brancher l'appareil sur le secteur avant de débiter la procédure.

NOTE: Une fois l'ouvrage créé, il n'est plus possible de le modifier ou d'ajouter des enregistrements. Pour le modifier, exécutez la procédure de préparation pour édition.

NOTE: Si vous créez un ouvrage depuis la catégorie "PlexRecording", il reste dans cette catégorie.

NOTE : La procédure de création du livre nécessite un espace libre sur la carte de 30 mégaoctets à 40 mégaoctets.

16.7. Fonctions du dossier réseau.

Grace à la fonction de dossier réseau, vous pouvez accéder, depuis votre ordinateur via la connexion réseau sans fil, à un dossier sur la carte SD du PLEXTALK, qui sera alors considéré comme un dossier partagé.

Pour activer la fonction dossier réseau, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.
- Appuyez sur les touches Droite ou Gauche pour atteindre l'option "gestion des supports", et sélectionnez-la en appuyant sur Validation.
- Appuyez sur les touches Droite ou Gauche pour atteindre l'option "dossier réseau", et sélectionnez-la en appuyant sur Validation.
- La connexion au réseau démarre, et PLEXTALK annonce le statut de connexion lorsqu'elle est établie.
- Vous pouvez alors accéder à la carte SD du PLEXTALK depuis votre ordinateur.

Pour interrompre la fonction de dossier réseau, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Annulation.
- Un message du PLEXTALK vous demande de confirmer l'opération.
- Appuyez sur la touche Validation pour confirmer, ou sur Annulation pour abandonner.

NOTE: Reportez-vous au chapitre 20 "paramètres réseau" pour plus de détails sur le paramétrage du réseau sans fil.

17. Les fonctions MÉMO du PLEXTALK.

En plus des fonctions de lecteur DAISY, lecteur de fichiers musicaux et audio, enregistreur DAISY, PLEXTALK vous offre des fonctions pour l'enregistrement de messages vocaux.

17.1. Enregistrer un nouveau mémo vocal.

Pour enregistrer un nouveau mémo vocal, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche Enregistrement et maintenez la enfoncée pendant l'enregistrement du message.
- Relâchez la touche à la fin du message.
- PLEXTALK ajoute ce message en mémoire interne, et retourne à l'endroit où vous étiez avant de débiter l'enregistrement du message.

NOTE : Il n'est pas possible d'enregistrer plus d'une minute.

Lorsque la minute est passée, PLEXTALK arrête automatiquement l'enregistrement.

NOTE : Le temps total disponible pour l'enregistrement des mémos vocaux est de 30 minutes. Le nombre maximal de mémos est de 200.

NOTE : Si le temps d'enregistrement dépasse 30 minutes, ou qu'il y a plus de 200 mémos, un message d'erreur est émis. Vous devez alors effacer des messages inutiles, ou les sauvegarder sur une carte SD.

NOTE : Pour l'enregistrement des messages, le taux de compression est fixé à MP3, 32kbps mono.

17.2. Consulter les mémos existants.

Vous pouvez consulter les messages enregistrés, soit séquentiellement, soit en allant directement à un message précis.

Pour écouter les messages séquentiellement, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche Livre jusqu'à ce que PLEXTALK annonce "mémos vocaux".
- Utilisez les touches Gauche ou Droite pour vous déplacer de message en message.
- Pour réécouter le message en cours, appuyez sur la touche Lecture/Stop.

Pour atteindre directement un message, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche Aller À.

- À l'aide du pavé numérique, entrez le nombre de mémos vocaux, puis appuyez sur Validation.

NOTE : vous pouvez aller directement au dernier mémo enregistré en tapant le chiffre 0 suivi de Validation.

17.3. Sauvegarder les mémos vocaux sur carte SD.

Reportez vous au paragraphe 18.2 pour plus d'informations sur la sauvegarde des mémos vocaux.

17.4. Effacer des mémos vocaux.

Pour effacer un message, procédez comme suit :

- Déplacez vous au message à supprimer, comme décrit ci dessus.
- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Utilisez les touches Gauche et Droite pour atteindre l'option "mémos vocaux", et sélectionnez la en appuyant sur la touche Validation.
- Utilisez les touches Gauche et Droite pour atteindre l'option "effacer le mémo vocal sélectionné", et sélectionnez la en appuyant sur la touche Validation.
- PLEXTALK vous demande de confirmer la procédure. Appuyez sur Validation pour confirmer, ou sur Annulation pour abandonner.

Pour effacer tous les mémos vocaux, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Utilisez les touches Gauche et Droite pour atteindre l'option "mémos vocaux", et sélectionnez la en appuyant sur la touche Validation.
- Utilisez les touches Gauche et Droite pour atteindre l'option "effacer tous les mémos vocaux", et sélectionnez la en appuyant sur la touche Validation.
- PLEXTALK vous demande de confirmer la procédure. Appuyez sur Validation pour confirmer, ou sur Annulation pour abandonner.

18. Sauvegarde.

18.1. Informations générales sur la sauvegarde.

Avant de procéder aux sauvegardes de vos données, notez bien les points suivants:

- Vous pouvez sauvegarder différents types de fichiers de la carte SD vers un support USB, et vice versa. Cependant, un lecteur USB de CD/DVD ne peut servir que pour copier des données sur la carte SD.
- Pendant la sauvegarde des données, PLEXTALK émet un message d'erreur s'il n'y a pas suffisamment d'espace libre sur le support cible.
- Lorsque vous sauvegardez un CD musical depuis un lecteur connecté en USB, vous pouvez choisir le taux de compression. Les fichiers ainsi copiés seront considérés comme fichiers audio et non comme un ouvrage DAISY.
- Si le niveau de la batterie est trop faible, la procédure de sauvegarde est interrompue. Avant tout, il est recommandé de brancher l'appareil sur le secteur avant de débiter la sauvegarde.
- Pour interrompre la procédure de sauvegarde en cours, appuyez sur Annulation.
- Les Web radios, ainsi que les épisodes de podcasts, ne peuvent pas être sauvegardés.
- Les données seront sauvegardées dans les dossiers suivants:
 - DAISY: dossier "PlexBackup"
 - Enregistrements: dossier "PlexBackup"
 - Musique: dossier "PlexBackup"
 - Textes: dossier "PlexBackup"
 - Livres audio Audible "AA": dossier "Backup" dans le dossier "Audible"
 - Autres livres Audio: dossier "Backup" dans le dossier "PlexAudioBook"

18.2. Sauvegarder les mémos vocaux.

Ce paragraphe décrit la procédure de sauvegarde des mémos depuis la mémoire interne vers la carte SD.

- Insérez une carte SD avec suffisamment d'espace libre.
- Appuyez sur la touche Ouvrage pour atteindre l'option "mémos vocaux", puis sur Validation pour confirmer.
- Appuyez sur la touche 9 pour activer les options de sauvegarde.
- PLEXTALK vous demande de confirmer l'opération. Appuyez sur Validation pour continuer, sur Annulation pour abandonner.

- Si vous avez choisi de poursuivre, la procédure de sauvegarde débute. PLEXTALK émet un message lorsque la sauvegarde est terminée.

NOTE: La mémoire interne qui contient les mémos vocaux, ne peut être sauvegardée que dans le dossier "PlexBackUp" de la carte SD.

NOTE : Les mémos vocaux sont sauvegardés sous forme d'un ouvrage DAISY avec une navigation de niveau 1. Chaque mémo représente une section.

NOTE : Lors de la sauvegarde des mémos vocaux, tous les mémos vocaux sont sauvegardés. Il n'est pas possible de sauvegarder les mémos individuellement.

18.3. Sauvegarde d'un ouvrage DAISY, d'un album ou d'un fichier-texte depuis une carte SD vers un support USB externe.

Pour sauvegarder un ouvrage DAISY, un album ou un fichier-texte depuis la carte SD sur un support USB externe, procédez comme suit:

- Connectez un support externe en USB, avec suffisamment d'espace libre.
- Insérez la carte SD source.
- Sur la carte, sélectionnez l'ouvrage DAISY, l'album ou le fichier-texte à sauvegarder, puis appuyez sur Validation.
- Appuyez sur la touche 9 pour activer les options de sauvegarde.
- PLEXTALK vous demande de confirmer l'opération. Appuyez sur Validation pour continuer, sur Annulation pour abandonner.
- Si vous avez choisi de poursuivre, la procédure de sauvegarde débute. PLEXTALK émet un message lorsque la sauvegarde est terminée.

NOTE : Vous ne pouvez pas sauvegarder vers un lecteur de CD/DVD connecté en USB.

18.4. Sauvegarde d'un ouvrage DAISY, d'un album ou d'un fichier-texte depuis un support USB externe vers une carte SD.

Pour sauvegarder un ouvrage DAISY, un album ou un fichier-texte depuis un support USB externe vers une carte SD, procédez comme suit:

- Insérez une carte SD avec suffisamment d'espace libre, et assurez vous qu'elle soit déverrouillée.
- Connectez le support externe en USB.
- Sur le support USB externe, sélectionnez l'ouvrage DAISY, l'album ou le fichier-texte à sauvegarder, puis appuyez sur Validation.
- Appuyez sur la touche 9 pour activer les options de sauvegarde.

- Pour la sauvegarde d'un CD musical, utilisez les touches Gauche ou Droite pour sélectionner le taux de compression, et confirmez en appuyant sur Validation.
- Lors de la sauvegarde d'un CD, vous devez choisir sa catégorie, "musique" ou "livres audio". Sélectionnez la catégorie avec les touches Droite et Gauche et appuyez sur Validation pour confirmer.
- PLEXTALK vous demande de confirmer l'opération. Appuyez sur Validation pour continuer, sur Annulation pour abandonner.
- Si vous avez choisi de poursuivre, la procédure de sauvegarde débute. PLEXTALK émet un message lorsque la sauvegarde est terminée.

18.5. Temps pour la copie des CDs musicaux.

Le temps approximatif pour la sauvegarde est donné selon le taux de compression :

Pour sauvegarder 50 minutes d'un CD musical sur une carte SD :

- PCM 44.1kHz Stéréo: 35 minutes environ.
- MP3 256K Stéréo Qualité élevée: 50 minutes environ.
- MP3 256K Stéréo: 40 minutes environ.
- MP3 128K Stéréo Qualité élevée: 55 minutes environ.
- MP3 128K Stéréo: 40 minutes environ.

NOTE : Ces durées sont approximatives.

Le temps de sauvegarde dépend de la taille des fichiers à copier, de leur nombre, et de la vitesse d'écriture de la carte SD.

19. Utiliser PLEXTALK comme lecteur de carte SD externe.

Vous pouvez connecter le PLEXTALK à un ordinateur, sur un port USB 2.0, pour l'utiliser comme un lecteur de carte externe. Ce chapitre décrit comment connecter et déconnecter PLEXTALK à un ordinateur.

NOTE : La connexion du PLEXTALK comme lecteur de carte est possible, sur les ordinateurs équipés de Windows 2000, XP, Vista ou Windows 7.

19.1. Que peut faire PLEXTALK une fois connecté à un ordinateur?

Lorsque le PLEXTALK est connecté à un ordinateur, il peut être utilisé comme lecteur de cartes pour réaliser les opérations habituelles de gestion de fichiers, telles que:

- Échanger des ouvrages DAISY, des fichiers audio ou des fichiers au format texte entre la carte SD et l'ordinateur.
- Créer, supprimer ou renommer des dossiers sur la carte SD.
- Supprimer ou renommer des fichiers sur la carte SD.
- Transférer des fichiers audio depuis un ordinateur sur la carte SD, et les écouter sur l'ordinateur, en d'autres termes PLEXTALK peut être utilisé comme unité de stockage de fichiers audio.

19.2. Connexion du PLEXTALK à l'ordinateur comme lecteur externe.

Procédez comme suit pour connecter PLEXTALK à votre ordinateur:

- Allumez l'ordinateur.
- Branchez l'alimentation-secteur du PLEXTALK, et allumez-le.
- Branchez le câble USB du PLEXTALK sur un port USB de l'ordinateur.
- L'ordinateur identifie automatiquement PLEXTALK comme un lecteur de cartes externe.

ATTENTION: Lorsque PLEXTALK est connecté à l'ordinateur, évitez de l'éteindre, de le débrancher ou de retirer la carte SD. Vous risqueriez de perdre des données, ou d'endommager les supports.

NOTE : Dès lors que PLEXTALK est connecté à un ordinateur et reconnu comme lecteur de cartes, les fonctions d'écoute et d'enregistrement de l'appareil sont indisponibles.

19.3. Déconnecter le PLEXTALK de l'ordinateur.

Procédez comme suit pour déconnecter le PLEXTALK de l'ordinateur.

- Cliquez sur l'icône "USB" ou "Retirer le périphérique en toute sécurité" située dans la zone de notification, en bas à droite de l'écran.
- Sélectionnez le lecteur correspondant à PLEXTALK dans la liste des périphériques USB.

NOTE : Si vous éprouvez des difficultés pour identifier ou manipuler ces fonctions, éteignez l'ordinateur et le PLEXTALK avant de débrancher le câble.

20. Paramètres réseau

PLEXTALK dispose de fonctions réseau via la connexion sans fil.

DANGER: En avion, ou en milieu hospitalier, conformez-vous aux consignes de sécurité en ce qui concerne l'utilisation des fonctions de réseau sans fil de votre PLEXTALK.

20.1. Connexion à un réseau sans fil.

20.1.1. Activation de la fonction sans fil.

Pour activer le réseau sans fil, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "paramètres du système" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez "activer ou désactiver le périphérique réseau" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez "activer le réseau" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.

20.1.2. Vérification des paramètres réseau et connexion.

Consulter la liste des réseaux sans fil disponibles dans la liste.

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "paramètres du système" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "paramètres réseau sans fil" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "réseau sans fil disponible" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.

- PLEXTALK annonce le nom, le statut de connexion, et la force du signal du premier réseau sans fil détecté. Appuyez sur les touches Droite ou Gauche pour consulter les informations d'un autre réseau.
- Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter puis appuyez sur la touche Validation.

Si le réseau choisi a déjà été configuré, PLEXTALK tente alors de s'y connecter. Si le réseau choisi n'a pas encore été déclaré, procédez comme suit:

- Sélectionnez "mode de sécurité". Sélectionnez le mode de sécurité avec les touches Droite ou Gauche, appuyez sur Validation puis entrez le mot de passe. Reportez-vous au chapitre 22. "Saisie de texte" pour plus d'informations. Une fois le nouveau nom entré, appuyez sur la touche Bas pour confirmer. Si l'option "non sécurisé" est choisie, aucun mot de passe n'est requis.
- Sélectionnez "paramètres furtifs". Si le réseau utilise la fonction "furtif", choisissez "activé". Dans le cas contraire, choisissez "désactivé". Appuyez ensuite sur Validation.
- Sélectionnez "paramètres DHCP". Avec les touches Droite ou Gauche, sélectionnez "activé" pour une configuration automatique, ou "désactivé" pour une configuration manuelle. Si vous avez choisi "activé", la procédure de configuration du proxy se lance.
- Entrez l'adresse IP. Une adresse IP est constituée de quatre groupes de chiffres. PLEXTALK annonce le premier groupe de chiffres. Pour les modifier, tapez les chiffres sur le pavé numérique, puis appuyez sur la touche Droite pour passer à la zone suivante. Pour passer à la zone suivante sans modification, appuyez simplement sur la touche Droite.
- Entrez les nombres de la deuxième à la quatrième zone. Appuyez sur la touche Droite pour passer à la zone suivante; pour revenir à la zone précédente, appuyez sur la touche Gauche. Lorsque les quatre groupes de chiffres sont saisis, appuyez sur la touche Bas.
- Entrez le masque de sous-réseau. Procédez comme pour la saisie de l'adresse IP.
- Entrez la passerelle par défaut. Procédez comme pour la saisie de l'adresse IP.
- Entrez les paramètres DNS. Vous pouvez définir un DNS primaire et un DNS secondaire. Procédez comme pour la saisie de l'adresse IP.
- Définition des paramètres du serveur proxy. Si vous utilisez un serveur proxy, sélectionnez "activé" avec les touches Droite ou Gauche, ou "désactivé" dans le cas contraire.
- Si vous avez sélectionné "désactivé", le menu sera fermé dès que la touche Validation aura été appuyée.
- Si vous avez sélectionné "activé", entrez l'adresse du serveur proxy et appuyez enfin sur la touche Bas.

- Entrez ensuite le numéro du port du serveur proxy et appuyez sur la touche Bas. PLEXTALK tente alors de se connecter au réseau sans fil.
- Le menu se ferme automatiquement lorsque la connexion est réussie. Par contre, si la connexion échoue, PLEXTALK retourne dans le menu afin de sélectionner un autre réseau.

NOTE: Les paramètres réseau tels que le nom réseau (SSID) ou le mode de sécurité, dépendent du type de réseau. Configurez ces paramètres en fonction de votre environnement réseau.

NOTE: Si le mode de sécurité choisi est WEP, le mot de passe contient 5, 10, 13 ou 26 caractères. Pour les modes de sécurité autres que WEP, la longueur du mot de passe varie entre 8 et 64 caractères.

NOTE: Si vous choisissez un réseau actuellement connecté, PLEXTALK se déconnecte, puis tente une nouvelle connexion, dans l'ordre de priorité défini. PLEXTALK demande une confirmation de déconnexion, appuyez sur la touche Validation pour confirmer, sur Annulation pour abandonner la déconnexion. Reportez-vous au paragraphe "20.3.5 Modifier ou supprimer des paramètres de réseau sans fil" pour plus d'informations sur l'ordre de priorité.

20.2. Comment PLEXTALK se connecte-t-il à un réseau.

PLEXTALK tente de se connecter au réseau, tant que le paramètre "Activer ou désactiver le réseau" est réglé sur "activé".

NOTE: Reportez-vous au paragraphe 20.1.1. "Activation de la fonction sans fil" pour activer ou désactiver la fonction réseau.

PLEXTALK tente dans un premier temps, de se connecter au dernier réseau utilisé. Si la connexion échoue, PLEXTALK tente alors de se connecter aux différents réseaux configurés, selon l'ordre de priorité défini. Reportez-vous au paragraphe "20.3.5. Modifier ou supprimer des paramètres de réseau sans fil" pour plus de détails à propos de l'ordre de priorité.

Si la fonction réseau n'a pas été utilisée pendant cinq minutes alors que le PLEXTALK n'est pas relié au secteur, la réactivation de la connexion prendra plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Ceci est dû au fait que le PLEXTALK passe la fonction réseau en mode d'économie d'énergie, et doit alors se reconnecter.

20.3. Paramètres réseau avancés.

20.3.1 Confirmation des informations réseau.

Les informations relatives au réseau peuvent être vérifiées dans ce menu. Les informations suivantes sont disponibles:

- Statut du point d'accès
- Force du signal
- DHCP
- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par défaut
- DNS primaire
- DNS secondaire
- Adresse MAC du réseau sans fil
- Date d'obtention du bail DHCP
- Date d'expiration du bail DHCP
- Adresse du serveur DHCP

Si PLEXTALK n'est pas connecté au réseau, les informations suivantes sont disponibles:

- Statut de connexion
- Adresse MAC du réseau sans fil

Pour confirmer les informations, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "paramètres du système" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "confirmer les informations réseau" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- PLEXTALK annonce les différentes informations; sélectionnez celle qui vous intéresse avec les touches Droite ou Gauche.

20.3.2 Chargement des paramètres réseau.

Différentes configurations réseau peuvent être chargées dans le PLEXTALK, au moyen d'un fichier préparé à cet effet sur votre ordinateur. Le logiciel de configuration crée un fichier nommé "NetworkSetting.ini". Copiez ce fichier à la racine de la carte SD ou sur un

support USB, et chargez les paramètres via l'option "chargement des paramètres réseau" du menu.

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "paramètres du système" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "chargement des paramètres réseau" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- PLEXTALK demande une confirmation pour le chargement du fichier. Appuyez sur Validation pour confirmer, sur Annulation pour abandonner.

NOTE: Si vous chargez un nouveau fichier, tous les anciens paramètres sont effacés.

NOTE: Si une carte SD et un support USB sont connectés simultanément et que chacun contient un fichier nommé "NetworkSetting.ini", c'est celui de la carte SD qui est chargé.

NOTE: Vous pourrez créer un fichier "NetworkSetting.ini" avec le logiciel de création de paramètres prévu à cet effet. Ce logiciel et son manuel sont disponibles sur le site Web de PLEXTALK. <http://www.plextalk.com/in/>

20.3.3. Sauvegarder les paramètres réseau.

Les paramètres réseau chargés dans le PLEXTALK peuvent être sauvegardés sur la carte SD ou un support USB. Pour ce faire, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "paramètres du système" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "sauvegarder les paramètres réseau" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation. PLEXTALK demande une confirmation de sauvegarde du fichier. Appuyez sur la touche Validation pour confirmer. Le fichier est sauvegardé à la racine de la carte SD ou du support USB. Pour abandonner l'opération, appuyez sur la touche Annulation.

NOTE: Si une carte SD et un support USB sont présents simultanément, le fichier est sauvegardé sur la carte SD.

20.3.4. Ajouter des paramètres réseau.

Pour ajouter des paramètres réseau, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "paramètres du système" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "paramètres réseau sans fil" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "ajouter les paramètres de réseau sans fil" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez "mode de sécurité". La procédure est identique à l'option "réseau sans fil disponible". Reportez-vous au paragraphe 20.1.2. "Vérification des paramètres réseau et connexion" pour plus de détails.
- Une fois la procédure terminée, le nouveau réseau est défini comme ayant la priorité la plus élevée. Le menu se ferme, et PLEXTALK tente de se connecter au nouveau réseau.

20.3.5. Modifier ou supprimer des paramètres de réseau sans fil.

Trois options, ("attribuer la priorité la plus haute et se connecter", "modifier les paramètres de réseau sans fil", et "supprimer les paramètres de réseau sans fil"), sont disponibles dans le menu "modifier et supprimer des paramètres réseau sans fil".

Pour modifier ou supprimer des paramètres réseau sans fil, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "paramètres du système" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "paramètres réseau sans fil" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "Modifier ou supprimer les paramètres de réseau sans fil" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez le réseau dont vous souhaitez modifier les paramètres, l'option "modifier ou supprimer les paramètres avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation. Les réseaux sans fil sont triés par priorité de connexion.

- Avec les touches Droite ou Gauche, sélectionnez parmi "attribuer la priorité la plus haute et se connecter", "modifier les paramètres de réseau sans fil", ou "supprimer les paramètres de réseau sans fil", puis validez.

Si vous sélectionnez l'option "attribuer la priorité la plus haute et se connecter":

- PLEXTALK demande une confirmation pour attribuer la priorité la plus élevée au réseau sans fil sélectionné. Appuyez sur la touche Validation pour confirmer. PLEXTALK tente alors de se connecter à ce réseau.

Si vous sélectionnez l'option "modifier les paramètres de réseau sans fil":

- Sélectionnez l'option "mode de sécurité". Les étapes pour la confirmation sont identiques à celles de l'option "réseaux sans fil disponibles". Reportez-vous à la section 20.1.2. "Vérification des paramètres réseau et connexion" pour plus de détails.
- Lorsque tous les paramètres sont entrés, les modifications sont enregistrées et le menu se referme automatiquement. Bien que les paramètres aient été modifiés, l'ordre de priorité pour la connexion reste le même.

NOTE: Pour modifier le SSID d'un réseau, supprimez-le d'abord puis créez-en un nouveau.

Si vous sélectionnez l'option "supprimer les paramètres de réseau sans fil":

- PLEXTALK demande une confirmation pour la suppression, appuyez sur Validation pour continuer. Une fois le réseau supprimé, PLEXTALK tente de se connecter au réseau dont la priorité est la plus élevée.

20.3.6. Paramètres du dossier réseau

Vous pouvez configurer le nom réseau, l'identifiant et le mot de passe. Les valeurs par défaut sont:

- Nom réseau: PTP1-(4 derniers chiffres du numéro de série), par exemple "PTP1-1234"
- Identifiant (ID): pas d'identifiant
- Mot de passe: pas de mot de passe

Pour changer les paramètres réseau, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "paramètres du système" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "paramètres du dossier réseau" avec les touches Droite ou Gauche et appuyez sur Validation.
- PLEXTALK annonce le nom, l'identifiant et le mot de passe. Un message vous demande si vous souhaitez les modifier. Appuyez sur Bas afin de pouvoir effectuer une modification.
- PLEXTALK annonce le nom réseau. Pour le confirmer, appuyez sur la touche Bas. Pour le modifier, entrez le nouveau nom à l'aide du pavé numérique. Avant tout, appuyez sur la touche Étoile et maintenez-la enfoncée pour effacer l'ancien nom. Le nom réseau peut contenir jusqu'à 15 caractères, soit 0-9, a-z, A-Z et le tiret (-). Le nom doit contenir au moins une lettre. Une fois le nouveau nom entré, appuyez sur la touche Bas pour confirmer.
- PLEXTALK annonce l'identifiant (ID). Pour le conserver, appuyez simplement sur la touche Bas. Pour le modifier, entrez le nouvel identifiant à l'aide du pavé numérique. Entrez le nouvel identifiant, d'une longueur maximale de 32 caractères, 0-9, a-z, A-Z, le tiret (-) et le souligné (_). Une fois l'identifiant entré, appuyez sur la touche Bas. Si vous effacez l'identifiant actuel et appuyez directement sur la touche Validation, le menu se ferme, et le nouveau paramétrage sera réglé aux valeurs par défaut.
- PLEXTALK annonce "mot de passe". Pour conserver le mot de passe actuel, appuyez sur Bas. Pour modifier le mot de passe (32 caractères au maximum), utilisez le pavé numérique. Confirmez ensuite en appuyant sur la touche Bas. Le paramétrage est terminé, PLEXTALK sort du menu.

NOTE: Reportez-vous au chapitre 22. "Saisie de texte" pour plus d'informations.

20.3.7. Remettre les paramètres réseau à leurs valeurs par défaut.

Les paramètres des options "activer ou désactiver le périphérique réseau", "paramètres réseau sans fil" et "paramètres du dossier réseau", peuvent être réinitialisés à leurs valeurs par défaut.

Pour réactiver les valeurs par défaut, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "paramètres du système" à l'aide des touches Droite et Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "paramètres réseau" à l'aide des touches Droite et Gauche et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "initialisation des paramètres réseau par défaut" à l'aide des touches Droite et Gauche et appuyez sur Validation.
- Un message vous demande de confirmer l'opération. Appuyez sur Validation pour confirmer, sur Annulation pour abandonner.

NOTE: Après la réinitialisation, la connexion réseau est désactivée.

21. Edition des fichiers texte.

PLEXTALK vous permet de rédiger des documents et de les sauvegarder au format texte. Ce chapitre décrit comment créer et sauvegarder des fichiers texte. Les méthodes de saisie de texte sont décrites dans le chapitre 22.

21.1. Création de fichiers texte.

Pour créer un fichier texte, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Sélectionnez l'option "gestion des supports" avec les touches Droite et Gauche et appuyez sur Validation.
- Sélectionnez l'option "créer un fichier texte" avec les touches Droite et Gauche et appuyez sur Validation.
- Un message vous demande de confirmer l'opération. Appuyez sur Validation pour poursuivre. Le nouveau document est créé, et vous vous retrouvez en mode édition.

21.2. Edition d'un fichier existant sur la carte SD.

Pour éditer un fichier existant, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Ouvrage pour sélectionner le fichier sur la carte SD.
- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "édition" avec les touches Droite et Gauche et appuyez sur Validation.
- Un message vous demande de confirmer l'opération. Appuyez sur Validation pour continuer. Vous pouvez alors modifier le fichier texte.

NOTE: L'édition d'un fichier sur le support USB n'est pas possible.

21.3. Sauvegarder un fichier texte.

Pour sauvegarder le fichier texte en cours, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "sauvegarder le texte" avec les touches Droite et Gauche et appuyez sur Validation.

- Un message vous demande de confirmer l'opération.
- Après un appui sur la touche Validation, le texte est sauvegardé et vous retournez dans le mode édition.

NOTE: Le nom du fichier est constitué de la première ligne du texte. Si le document est vide au moment de la sauvegarde, la date et l'heure seront utilisés comme nom de fichier.

21.4. Quitter le mode édition.

21.4.1. Sauvegarder et quitter le mode édition.

Pour sauvegarder le document et quitter le mode édition, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Ouvrage.
- Un message vous demande de confirmer que vous souhaitez sauvegarder le document et sortir du mode édition. Appuyez sur la touche Validation pour confirmer, sur Annulation pour revenir au mode édition.
- Si vous confirmez, le document est sauvegardé.

Vous pouvez également procéder de la manière suivante:

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "sauvegarder et quitter le mode édition" avec les touches Droite et Gauche et appuyez sur Validation.
- Un message vous demande de confirmer l'opération. Appuyez sur Validation pour poursuivre, sur Annulation pour abandonner.
- Si vous confirmez, le document est sauvegardé et est alors prêt à être diffusé.

21.4.2. Quitter le mode édition sans sauvegarde.

Pour quitter le mode édition sans sauvegarder le document, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "quitter le mode édition sans sauvegarder" avec les touches Droite et Gauche et appuyez sur Validation.
- Un message vous demande de confirmer l'opération. Appuyez sur Validation pour poursuivre, sur Annulation pour abandonner.
- Si vous appuyez sur Validation, les modifications éventuelles sont supprimées, le document revient à la version antérieure.

21.5. Renommer un fichier

Pour renommer un fichier, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "renommer le fichier" avec les touches Droite et Gauche et appuyez sur Validation.
- Entrez le nouveau nom.
- Appuyez sur la touche Bas, PLEXTALK vous demande de confirmer l'opération.
- Appuyez sur Validation pour continuer, sur Annulation pour abandonner.

NOTE: Reportez au chapitre 22 pour plus de détails sur l'entrée de texte.

NOTE: Appuyez sur la touche Lecture/Stop pour écouter le nouveau nom du fichier.

21.6. Supprimer la ligne en cours.

Pour supprimer la ligne en cours, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "supprimer la ligne courante" avec les touches Droite et Gauche et appuyez sur Validation.
- Un message vous demande de confirmer l'opération. Appuyez sur Validation pour continuer, sur Annulation pour abandonner.

21.7. Effacer tout le texte.

Pour effacer tout le texte, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "supprimer tout le texte du fichier" avec les touches Droite et Gauche et appuyez sur Validation.
- Un message vous demande de confirmer l'opération. Appuyez sur Validation pour continuer, sur Annulation pour abandonner.

22. Saisie de texte.

Ce chapitre décrit les méthodes pour la saisie de texte.

22.1. Saisie en mode ABC.

Plusieurs caractères sont associés à chaque touche du pavé numérique, on les sélectionne par des appuis successifs sur les touches.

Ordre des caractères

Les caractères associés à un chiffre sont classés dans cet ordre: "lettres en minuscule", "chiffres", "lettres en majuscule". Par exemple, des appuis successifs sur la touche 5 font défiler les caractères suivants: "j, k, l, 5, J, K, L".

Le caractère est validé automatiquement après 2 secondes.

Lorsqu'un caractère est sélectionné, il est automatiquement validé après 2 secondes sans un nouvel appui sur la touche, et PLEXTALK l'annonce.

Saisie de caractères consécutifs associés à une même touche

Pour saisir plusieurs caractères associés à la même touche, appuyez sur la touche Droite pour passer au caractère suivant. Par exemple, pour entrer "ab", entrez le "a" en appuyant une fois sur la touche "2", puis appuyez sur la touche Droite, puis entrez le "b" en appuyant 2 fois sur la touche 2.

Exemples de saisie

Pour écrire "PTP1"

P : Appuyez six fois sur la touche 7.

T : Appuyez cinq fois sur la touche 8.

P : Appuyez six fois sur la touche 7.

1 : Appuyez cinq fois sur la touche 1.

Chiffres et lettres disponibles

Les caractères suivants sont associés aux touches comme suit:

1 regroupe ".", "@", "/", ":", "1"

2 regroupe a, b, c, ç, à, â, æ, 2, A, B, C, Ç, À, Â et Æ

3 regroupe d, e, f, ë, é, è, ê, 3, D, E, F, Ë, É, Ê et Ë

4 regroupe g, h, i, î, í, î, 4, G, H, I, Î, Í et Î

5 regroupe j, k, l, 5, J, K, et L

6 regroupe m, n, o, ô, œ, 6, M, N, O, Ô et Æ

7 regroupe p, q, r, s, 7, P, Q, R et S

8 regroupe t, u, v, ü, ù, û, 8, T, U, V, Ü, Ù et Û
 9 regroupe w, x, y, z, 9, W, X, Y, et Z
 0 regroupe ?, _, =, et 0

Confirmer la saisie des caractères

Appuyez sur la touche Lecture/Stop pour écouter les caractères saisis.

Changer de mode de saisie

Pour changer de mode de saisie, appuyez sur la touche Signets pour passer du mode ABC au mode numérique puis au tableau des symboles.

NOTE: Si la saisie ne peut se faire qu'un mode numérique, un appui sur la touche Signets reste sans effet.

22.2. Saisie des chiffres en mode numérique.

Le mode numérique permet d'entrer les chiffres en appuyant simplement sur les touches du pavé numérique. Appuyez plusieurs fois sur la touche Signets pour sélectionner le mode numérique.

Saisissez ensuite les chiffres sur le pavé numérique. Les touches de 1 à 0 correspondent à chacun des chiffres.

22.3. Saisie de caractères particuliers depuis le tableau des symboles.

Ce mode permet de sélectionner les caractères, en parcourant le tableau des symboles à l'aide des touches 2 4, 6 et 8, et en validant par un appui sur la touche Dièse (#). Appuyez plusieurs fois sur la touche Signets pour sélectionner le mode "tableau des symboles".

Pour parcourir le tableau des symboles disponibles, appuyez sur la touche 2 pour remonter, sur la touche 4 pour aller à gauche, sur la touche 6 pour aller à droite, sur la touche 8 pour descendre. Le tableau des symboles est décrit ci-dessous. Pour entre plusieurs fois de suite le même caractère, appuyez sur la touche Dièse autant de fois que nécessaire.

.	,	'	"	:	;	?	
+	-	=	/	\	_	[]
!	@	#	\$	%	`	{	}
^	&	*	()	~	<	>

22.4. Déplacer le point d'insertion

Reculer d'un caractère

appuyez sur la touche Gauche pour aller au caractère précédent.

Avancer d'un caractère

Appuyez sur la touche Droite pour aller au caractère suivant.

Reculer d'un mot

Appuyez simultanément sur les touches Gauche et 0 pour aller au mot précédent.

Avancer d'un mot

Appuyez simultanément sur les touches Droite et 0 pour aller au mot précédent.

Revenir au début de la ligne

Appuyez sur la touche Gauche et maintenez-la enfoncée pour revenir au début de la ligne.

Vous pouvez aussi appuyer simultanément sur les touches 5 et Étoile.

Atteindre la fin de la ligne

Appuyez sur la touche Droite et maintenez-la enfoncée pour revenir au début de la ligne.

Vous pouvez aussi appuyer simultanément sur les touches 8 et Étoile.

Reculer d'une ligne

Appuyez sur la touche Haut pour aller à la ligne précédente.

Avancer d'une ligne

Appuyez sur la touche Bas pour aller à la ligne suivante.

Reculer d'un écran (40 lignes).

Appuyez simultanément sur les touches Étoile et 6 pour reculer de 40 lignes.

Avancer d'un écran (40 lignes).

Appuyez simultanément sur les touches Étoile et 9 pour reculer de 40 lignes.

Reculer d'un paragraphe

Appuyez simultanément sur les touches Haut et 0 pour reculer d'un paragraphe.

Avancer d'un paragraphe

Appuyez simultanément sur les touches Bas et 0 pour avancer d'un paragraphe.

Revenir au début du texte.

Appuyez sur la touche Haut et maintenez-la enfoncée pour revenir au début du texte.

Atteindre la fin du texte

Appuyez sur la touche Bas et maintenez-la enfoncée pour atteindre la fin du texte.

22.5. Insérer des espaces, retours à la ligne, et supprimer des caractères.

Espace (caractère blanc)

Appuyez sur la touche Dièse pour insérer des espaces.

Retour arrière, suppression du caractère précédent

Appuyez sur la touche Étoile pour effacer le caractère précédent.

Supprimer le caractère à la position du curseur

Appuyez simultanément sur les touches Étoile et 7 pour effacer le caractère à la position du point d'insertion.

Supprimer tous les caractères, depuis le menu

Appuyez sur la touche Étoile et maintenez-la enfoncée.

Effacer tous les caractères, pendant l'édition

Reportez-vous à la section 21.7 "effacer tout le texte".

Effacer la ligne en cours

Reportez-vous à la section 21.6 "supprimer la ligne en cours".

Nouvelle ligne

Appuyez simultanément sur les touches Étoile et Dièse pour commencer une nouvelle ligne.

Caractère de Tabulation

Appuyez simultanément sur les touches Étoile et 2 pour insérer une tabulation.

Passer du mode "insertion" au mode "refrappe"

Appuyez simultanément sur les touches Étoile et 4 pour basculer entre les modes "refrappe" et "insertion".

23. Autres fonctions.

23.1. Le fichier d'aide intégré.

Pour ouvrir le fichier d'aide, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche 0.
- Parcourez le fichier d'aide de la même façon que n'importe quel ouvrage DAISY en texte seul.

Pour quitter le fichier d'aide, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche 0.

23.2. Vérification des propriétés du système.

Pour vérifier le numéro de série ou de version du PLEXTALK, ou la clé PDTB, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "paramètres du système" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "Propriétés du système" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Le numéro de version et le numéro de série sont annoncés alternativement. L'information concernant la clé PDTB n'est annoncée que si une clé PDTB est installée.
- Lorsque vous avez noté les informations utiles, appuyez sur Validation pour sortir du menu.

23.3. Supprimer les clés d'autorisation

Pour supprimer toutes les clés d'autorisation enregistrées dans le PLEXTALK, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option "paramètres du système" avec les touches Droite et Gauche et appuyez sur Validation.

- Sélectionnez l'option "suppression des clés d'autorisation" avec les touches Droite et Gauche et appuyez sur Validation.
- Un message vous demande de confirmer la procédure.
- Sur le pavé numérique, tapez 1234 puis confirmez en appuyant sur la touche Validation.

NOTE: Il est impératif de taper les chiffres 1 2 3 4 selon cet ordre.

NOTE: On appelle "clés d'autorisation" les clés permettant d'écouter les ouvrages DAISY protégés par le système PDTB. PDTB est une technologie de cryptage proposée par le consortium DAISY.

23.4. Réinitialisation avec les paramètres par défaut.

Pour remettre tous les paramètres à leur valeur par défaut, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu principal.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "paramètres du système" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour atteindre l'option "réinitialiser avec les valeurs par défaut" et sélectionnez la en appuyant sur Validation.
- PLEXTALK vous demande de confirmer la procédure, appuyez sur Validation pour continuer, sur Annulation pour abandonner. Après quelques instants, PLEXTALK redémarre.

La liste ci-dessous reprend les paramètres du PLEXTALK et leur valeur par défaut, qui sont activées lorsque vous choisissez de rétablir les paramètres-usine.

- Son d'attente: Son 1
- Paramétrage de la synthèse, tonalité: 0
- Source audio: micro externe
- Mode d'enregistrement: par défaut
- Paramètre de section automatique: Désactivé
- Niveau de l'environnement sonore: normal
- Délai de fin d'enregistrement: Désactivé
- Mode de déclenchement de l'enregistrement: Quand la touche Enregistrement est appuyée.
- Contrôle automatique du gain: Activé
- Assistance vocale durant l'enregistrement: Activé
- Lecture des signets vocaux: Lire
- Niveau d'enregistrement: 10
- Paramètre de lecture: Lecture normale

- Vitesse de lecture: 0
- Tonalité: 0
- Volume de l'assistance vocale: 0
- Volume de lecture: 13
- Annonce du nom des fichier audio: annoncé
- Paramètre de lecture des ouvrages DAISY multimédia: audio

NOTE: Les signets sont supprimés lors de la réactivation des paramètres par défaut.

NOTE: Les paramètres réseau ne sont pas supprimés lors de la réactivation des paramètres par défaut. Reportez-vous au paragraphe 20.3.7 "remettre les paramètres réseau à leurs valeurs par défaut" pour plus de détails.

Annexe A - Caractéristiques générales.

NOTE : Shinano Kenshi se réserve le droit de modifier les caractéristiques de l'appareil à tout moment, et sans préavis.

Ce chapitre présente de façon détaillée les caractéristiques principales du lecteur PTP1.

Caractéristiques générales.

Lecteur de cartes SD :

Cartes SD/SDHC

Formats lus :

Ouvrages DAISY conformes aux standards 2.0, 2.02 et 3.0

Fichiers audio aux formats MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) et Audible Format 4(.aa).

CDs musicaux (CD-DA): (lecteur CD/DVD USB externe)

Fichiers texte : Texte seul, HTML, Microsoft .doc, .docx

Web radio

Formats de listes de lecture supportés: PLS, M3U, ASX

Formats de livres audio compatibles: MP3, WMA

Protocoles Streaming (diffusion en direct): HTTP, MMS

Méthode d'enregistrement:

DAISY 2.02

Formats audio pour l'enregistrement DAISY 2.02:

PCM 44.1kHz stéréo

PCM 22.05kHz mono

MP3 256kbps 44.1kHz stéréo

MP3 128kbps 44.1kHz stéréo

MP3 64kbps 44.1kHz mono

MP3 32kbps 22.05kHz mono

Formats d'enregistrement des mémos vocaux:

MP3 32kbps 22.05kHz mono

Connexions audio :

Sortie casque, (Stéréo)

Micro externe/Entrée ligne (stéréo)
Microphone incorporé (mono)
Haut-parleur interne (Mono)

Connexion externe :

USB 2.0
USB OTG (bus USB power)

Précision de l'horloge :

Approximativement 60 secondes par mois

Alimentation électrique :

Adaptateur secteur, courant alternatif 100 V à 240 V, 50 ou 60 Hz

Dimensions et poids :

Longueur 112 mm
Largeur 55 mm
Hauteur 16 mm
Poids 110g environ

Consommation électrique (maximum) :

20W

Température et taux d'humidité acceptables pour le fonctionnement :

De 40 à 104 °Fahrenheit

De 5 à 40 °Celsius

Taux d'humidité de 20% à 80%, sans condensation.

Caractéristiques Audio.

Casque (sortie ligne) :

Impédance 32 ohm

Jack 3.5mm de diamètre stéréo mini jack

Micro externe (auto-alimenté):

Impédance en entrée 2.2kOhm

Mini-jack stéréo 3,5mm de diamètre

Entrée ligne:

Impédance en entrée: 20kOhm

Mini-jack stéréo 3,5mm de diamètre

Haut-parleur intégré :

Impédance de sortie 8 ohm

Sortie 150mW

Micro incorporé

Micro Electret à condensateur

Fonctions principales.

Assistance vocale :

Annonce de la procédure en cours

Annonce des fonctions des touches en mode Descripteur de Touches

Annonce des éléments de menus

Annonce des informations d'aide (appuyez sur la touche 5)

Fonctions de recherche :

Titre, Groupe, Page, Phrase, Signet, Album, Piste, Niveau, Écran, Paragraphe,

Ligne, Phrase, Épellation, Mot, Caractère

Réglage du Volume :

De 0 à 25 (par pas de 1)

Réglage du volume de l'assistance vocale :

De -5 à +5 (par pas de 1)

Réglage de la vitesse :

11 valeurs, de -2, à 0, jusqu'à +8 (par pas de 1).

La vitesse normale est à 0.

-2 correspond à la moitié de la vitesse normale, +4 au double, +8 au triple.

Réglage de la tonalité :

13 valeurs, de -6, à 0, jusqu'à +6 (par pas de 1)

La tonalité normale est à 0

Temps d'enregistrement sur une carte SD (2GO):

(Note: Les temps donnés sont approximatifs)

DAISY PCM 44.1kHz stéréo 3 heures

DAISY PCM 22.05kHz mono 12 heures

DAISY MP3 256kbps stéréo 15 heures

DAISY MP3 128kbps stéréo 30 heures

DAISY MP3 64kbps mono 60 heures
DAISY MP3 32kbps mono 120 heures

Ajustement du niveau d'enregistrement:

Choisissez entre microphone externe et entrée ligne pour la source audio
De 0 à 20 (par pas de 1)
Contrôle automatique du gain disponible

Fonctions mémoire :

Signets et signets vocaux, 10000 au maximum
Signets vocaux, enregistrement total de 30 minutes
Mémos vocaux, maximum de 30 minutes d'enregistrement, ou 200 mémos

Caractéristiques de la batterie.

Type: Lithium

Dimensions :

Longueur 40 mm
Largeur 75 mm
Hauteur 20 mm

Capacité: 1500 milliAmpère heure

Temps de charge:

4 heures environ avec l'alimentation-secteur.
4.5 heures par le câble USB.
Note: Il est possible de recharger l'appareil en USB même s'il est éteint.

Temps de fonctionnement :

Format DAISY, enregistrement MP3, 8 heures
Format DAISY, lecture MP3, 10 heures

NOTE : Ces durées sont approximatives.

NOTE : Les temps de charge et d'autonomie dépendent de la température ambiante et des conditions d'utilisation.

Caractéristiques du lecteur de cartes

Type de cartes: SD, SDHC

Système de fichiers: FAT-32/16

Systèmes d'exploitation: Windows 2000, XP, Vista et Windows 7.

Fonctions réseau sans fil

Réseau sans fil: IEEE802.11b/g

Information de Copyright pour Ogg Vorbis.

Ce programme est fourni par les détenteurs du copyright et les contributeurs "en l'état", sans qu'aucune garantie d'aucune sorte n'y soit attachée, y compris les garanties commerciales habituelles. La fondation détentrice du copyright, ainsi que les contributeurs, ne pourront être tenus pour responsables, en aucun cas, de dommages indirects, directs, accidentels, spéciaux, ou consécutifs à l'utilisation du produit; ils ne sauraient être mis en cause en cas de perte de données, de l'interruption d'une activité commerciale, d'une perte de bénéfices; cette liste n'est ni exhaustive, ni limitative. L'utilisateur final est averti des risques éventuels, et la responsabilité des concepteurs ne saurait être invoquée.

Annexe B - Structure du Menu.

Cette annexe liste les entrées du menu principal et leurs sous-menus.

Édition:

- Créer un titre.
- Annuler un titre.
- Effacer la section

Édition (Texte):

- Supprimer la ligne courante
- Supprimer tout le texte du fichier
- Sauvegarder le texte
- Sauvegarder et quitter le mode édition
- Quitter le mode édition sans sauvegarder
- Renommer le fichier

Paramètres d'enregistrement:

- Mode d'enregistrement
 - Par défaut.
 - Conférence.
 - Audio.
 - Cassettes analogiques
 - Radio
 - Personnalisé
- Puis choisissez la qualité sonore
 - PCM 44.1kHz stéréo
 - PCM 22.05kHz mono
 - MP3 256kbps 44.1kHz stéréo
 - MP3 128kbps 44.1kHz stéréo
 - MP3 64kbps 44.1kHz mono
 - MP3 32kbps 22.05kHz mono
- Activation-désactivation de l'assistance vocale pendant l'enregistrement
 - Assistance vocale activée
 - Assistance vocale désactivée
- Modification de la source audio externe
 - Mode micro
 - Mode entrée ligne
- Contrôle automatique du gain
 - Contrôle automatique du gain activé
 - Contrôle automatique du gain désactivé

Paramètres de lecture:

Paramètres de répétition et de lecture en boucle

- Lecture standard.

- Répétition de l'ouvrage (Daisy, Texte et livres audio)

- Répétition de la piste (Fichiers Audio)

- Répétition de l'album (Fichiers Audio)

- Répétition de tous les albums (Fichiers Audio)

- Répétition aléatoire (Fichiers Audio)

Lecture du nom du fichier audio en cours

- Lecture du nom du fichier audio

- Lecture du numéro de la piste audio

Paramètres de lecture des ouvrages DAISY multimédia

- Audio

- Texte

Signet:

Paramètres de lecture pour les signets vocaux.

- Signets vocaux activé

- Signets vocaux désactivé

- Effacer tous les signets dans l'ouvrage en cours.

Mémos vocaux:

- Effacer le mémo vocal sélectionné.

- Effacer tous les mémos vocaux

Podcast

- Mise à jour de la liste des épisodes

- Récupérer tous les épisodes du podcast

Gestion du support:

- Information sur le support

- Effacer la carte SD

- Créer un ouvrage

- Créer un fichier texte

- Supprimer l'ouvrage sélectionné (Supprimer l'album sélectionné, Effacer tous les mémos vocaux)

- Supprimer un fichier

- Préparation pour édition

- Créer le livre

- Dossier réseau

Paramètres du système:

Propriétés du système

- Version du système

- Numéro de série

- Clé installée (si disponible).

Voix de lecture de texte

- Voix 1

- Voix 2

Son d'attente

- Son d'attente 1

- Son d'attente 2

- Pas de son d'attente

Bips Clavier

- Bip clavier activé

- Bip clavier désactivé

Réglage de la date et de l'heure

Tonalité de la voix de synthèse

Paramètres réseau

- Confirmer les informations réseau

- Chargement des paramètres réseau

- Sauvegarder les paramètres réseau

- Activer ou désactiver le périphérique réseau

- Paramètres réseau sans fil

 - Réseau sans fil disponible

 - Ajouter les paramètres de réseau sans fil

 - Modifier ou supprimer les paramètres de réseau sans fil

 - Attribuer la priorité la plus haute et se connecter

 - Modifier les paramètres de réseau sans fil

 - Supprimer les paramètres de réseau sans fil

- Paramètres du dossier réseau

- Initialisation des paramètres réseau par défaut

Suppression des clés d'autorisation

Réinitialiser avec les valeurs par défaut.

Annexe C - En cas de problème.

Problèmes lors de l'utilisation courante.

Problème: vous allumez l'appareil et le courant n'arrive pas.

Cause possible 1 : Le câble ou l'adaptateur secteur est débranché.

Solution: Rebranchez solidement la prise murale ainsi que la prise dans le PLEXTALK, et vérifiez que l'ensemble est bien connecté.

Cause possible 2 : Le verrouillage du clavier est activé.

Solution: Désactivez le verrouillage du clavier.

Problème: Le courant arrive, mais PLEXTALK ne fonctionne pas.

Cause possible: Le verrouillage du clavier est activé.

Solution: Désactivez le verrouillage du clavier.

Problème: PLEXTALK ne s'éteint pas, et l'appui sur les touches du clavier reste sans effet.

Cause possible 1 : Le verrouillage du clavier est activé.

Solution: Désactivez le verrouillage du clavier.

Cause possible 2: Erreur inconnue.

Solution: Appuyez sur la touche Marche/Arrêt, et maintenez-la enfoncée plus de 10 secondes.

Si cela ne donne aucun résultat, débranchez l'appareil, retirez la batterie et réinstallez-la.

Problème: Enregistrement impossible sur la carte SD.

Cause possible 1: Problème au niveau de la source sonore.

Solution: Vérifiez la source sonore, et modifiez éventuellement les paramètres.

Cause possible 2: Il n'y a pas suffisamment d'espace disponible sur la carte SD.

Solution: Supprimez des données inutiles de la carte, ou insérez une autre carte disposant de suffisamment d'espace libre.

Cause possible 3: La carte SD est verrouillée.

Solution: Retirez la carte, amenez le système de verrouillage à sa position "déverrouillée", et remettez la carte dans l'appareil.

Problème: Le niveau d'enregistrement ne peut pas être modifié.

Cause possible 1: Le contrôle de niveau d'enregistrement est réglé sur "automatique".

Solution: Désactivez le contrôle automatique du niveau d'enregistrement dans le menu.

Problème: On n'entend pas l'assistance vocale.

Cause possible 1: Le volume est à 0.

Solution: Augmentez le volume jusqu'à ce que l'assistance vocale soit audible.

Cause possible 2: L'assistance vocale est désactivée pendant l'enregistrement.
Solution: Modifiez le paramètre pour activer l'assistance vocale durant l'enregistrement.

Messages d'erreurs annoncés au cours de la lecture d'un ouvrage DAISY.

Message: "Périphérique SD non supporté."

Cause possible : La carte SD est formatés avec un système de fichiers incompatible avec PLEXTALK.

Solution: Utilisez des cartes ou clés USB formatés en FAT16 ou FAT32.

Message: "Erreur de lecture".

Cause possible: Le titre ne peut être diffusé.

Solution: Appuyez sur la touche Ouvrage puis sur les touches Droite ou Gauche pour essayer de sélectionner un autre ouvrage.

Erreurs lors de l'utilisation des mémos vocaux.

Message: "Espace disponible pour les mémos vocaux insuffisant".

Cause possible: Il ne reste pas suffisamment de mémoire pour l'enregistrement d'un nouveau mémo.

Solution: Supprimez des mémos inutiles. Si nécessaire, vous pouvez les sauvegarder avant de les supprimer.

Erreurs lors de l'utilisation du PLEXTALK comme lecteur de cartes SD sur un ordinateur.

Problème: Le lecteur ne fonctionne pas.

Cause possible 1: Le câble USB n'est pas correctement branché.

Solution: Rebranchez le câble. Vérifiez les connecteurs, assurez-vous qu'ils ne soient pas tordus ou abîmés.

Cause possible 2: L'appareil n'est pas alimenté.

Solution: Vérifiez si l'alimentation et le câble sont bien branchés, et si PLEXTALK est bien allumé.

Problème: Écriture impossible sur la carte SD.

Cause possible 1: La carte SD est verrouillée.

Solution: Retirez la carte, amenez le système de verrouillage à sa position "déverrouillée", remettez-la dans l'ordinateur et réessayez.

Cause possible 2: L'appareil n'est pas alimenté.

Solution: Vérifiez si l'alimentation et le câble sont bien branchés, et si PLEXTALK est bien allumé.

Cause possible 3: Le câble USB n'est pas correctement branché.

Solution: Rebranchez le câble. Vérifiez les connecteurs, assurez-vous qu'ils ne soient pas tordus ou abîmés.

Problème: Impossible d'ajouter des fichiers sur la carte SD.

Cause possible 1: Il n'y a pas suffisamment d'espace libre sur la carte.

Solution: Supprimez des données de la carte pour libérer de l'espace.

Cause possible 2: La carte SD est verrouillée.

Solution: Retirez la carte, amenez le système de verrouillage à sa position "déverrouillée", remettez-la dans l'ordinateur et réessayez.

Annexe D - Informations techniques concernant les modes d'enregistrement et les qualités sonores.

1. Paramètres des modes d'enregistrement.

Les 4 paramètres suivants sont prédéfinis dans les modes d'enregistrement :

- Paramètres de section automatique – PLEXTALK peut, lors de l'enregistrement d'un ouvrage DAISY, créer automatiquement une nouvelle section après un temps déterminé de silence, 2 secondes par exemple. Choisissez la valeur "sans", pour que les sections ne soient pas créées automatiquement.
- Délai avant l'arrêt automatique quand aucun son n'est détecté – Il s'agit du temps pendant lequel PLEXTALK continue d'enregistrer alors qu'aucun son n'est détecté. Après quoi, l'enregistrement s'arrête.
- Mode de déclenchement de l'enregistrement – L'enregistrement peut démarrer soit lors de l'appui sur la touche ENREGISTREMENT, soit lorsqu'un son est détecté.
- Niveau de l'environnement sonore – Si l'enregistrement a lieu dans un milieu silencieux, un studio par exemple, utilisez la valeur "faible". Dans un milieu bruyant, (une réunion ou une conférence), utilisez la valeur "élevé".

2. Valeurs des paramètres selon les modes prédéfinis.

Les valeurs des différents paramètres dans chacun des 5 modes sont les suivantes :

Mode par défaut:

- Paramètres de section automatique: Désactivé
- Délai avant l'arrêt automatique quand aucun son n'est détecté: Désactivé
- Mode de déclenchement de l'enregistrement: Quand la touche Enregistrement est appuyée.
- Niveau de l'environnement sonore: Normal (-28dB)

Mode Conférence:

- Paramètres de section automatique: Désactivé
- Délai avant l'arrêt automatique quand aucun son n'est détecté: Désactivé
- Mode de déclenchement de l'enregistrement: Quand la touche Enregistrement est appuyée.
- Niveau de l'environnement sonore: Élevé (-20dB)

Mode Audio:

- Paramètres de section automatique: 2 secondes
- Délai avant l'arrêt automatique quand aucun son n'est détecté: Une minute
- Mode de déclenchement de l'enregistrement: Quand la touche Enregistrement est appuyée.
- Niveau de l'environnement sonore: Faible (-40dB)

Mode Cassette Analogique:

- Paramètres de section automatique: 4 secondes
- Délai avant l'arrêt automatique quand aucun son n'est détecté: Une minute
- Mode de déclenchement de l'enregistrement: Quand un son est détecté.
- Niveau de l'environnement sonore: Normal (-28dB)

Mode Radio:

- Paramètres de section automatique: Désactivé
- Délai avant l'arrêt automatique quand aucun son n'est détecté: Une minute
- Mode de déclenchement de l'enregistrement: Quand un son est détecté.
- Niveau de l'environnement sonore: Normal (-28dB)

3. Valeurs possibles des paramètres en mode Personnalisé.

En mode "personnalisé", vous avez le choix entre les valeurs suivantes pour chacun des paramètres :

- Paramètres de section automatique: "Désactivé", "1 seconde", "2 secondes", "3 secondes", "4 secondes" ou "5 secondes".
- Délai avant l'arrêt automatique quand aucun son n'est détecté: "Désactivé", "30 secondes", "1 minute", "2 minutes", "3 minutes", "4 minutes" ou "5 minutes".
- Mode de déclenchement de l'enregistrement: "Quand la touche Enregistrement est appuyée" ou "Quand un son est détecté".
- Niveau de l'environnement sonore: "Faible (-40 dB)", "Normal (-28 dB)" ou "Élevé (-20 dB)".

NOTE : Les valeurs de ces paramètres pour les modes Défaut, Conférence, Audio, Cassette et Radio, ne peuvent pas être modifiés ; par contre, en mode Personnalisé, vous pouvez ajuster tous ces paramètres en fonction de vos besoins.

NOTE : Pendant un enregistrement avec le micro incorporé, le niveau du bruit de fond sera automatiquement réglé sur "Élevé".

4. Temps d'enregistrement disponibles en fonction des qualités sonores.

Le temps d'enregistrement disponible dépend de la qualité sonore choisie. Plus la qualité est bonne, moins il y a de temps d'enregistrement. La liste ci dessous indique les temps d'enregistrement approximatifs pour chaque qualité sonore, sur 4 supports différents.

PCM 44.1kHz stéréo:

- Carte SD, 1GO: 90 minutes
- Carte SD, 2GO: 3 heures
- Carte SD, 4GO: 6 heures
- Carte SD, 8GO: 12 heures

PCM 22.05kHz mono:

- Carte SD, 1GO: 6 heures
- Carte SD, 2GO: 12 heures
- Carte SD, 4GO: 24 heures
- Carte SD, 8GO: 48 heures

MP3 256 k stéréo:

- Carte SD, 1GO: 7.5 heures
- Carte SD, 2GO: 15 heures
- Carte SD, 4GO: 30 heures
- Carte SD, 8GO: 60 heures

MP3 128 k stéréo:

- Carte SD, 1GO: 15 heures
- Carte SD, 2GO: 30 heures
- Carte SD, 4GO: 60 heures
- Carte SD, 8GO: 120 heures

MP3 64 k mono:

- Carte SD, 1GO: 30 heures
- Carte SD, 2GO: 60 heures
- Carte SD, 4GO: 120 heures
- Carte SD, 8GO: 240 heures

MP3 32 k mono:

- Carte SD, 1GO: 60 heures
- Carte SD, 2GO: 120 heures
- Carte SD, 4GO: 240 heures
- Carte SD, 8GO: 480 heures

NOTE : Les temps indiqués ci-dessus sont approximatifs, et dépendent du nombre de titres et de la structure de l'ouvrage.

Annexe E: Questions et réponses sur les paramètres réseau

Problème / Question	Solution / Réponse
Je souhaite connaître l'adresse IP du PLEXTALK	Vous pouvez vérifier l'adresse IP dans l'option "confirmer les paramètres réseau" du menu "paramètres réseau".
PLEXTALK ne se connecte au point d'accès prioritaire.	Vous pouvez consulter la liste des points d'accès disponibles dans le menu des paramètres réseau. Si PLEXTALK ne peut pas se connecter au point d'accès, désactivez puis réactivez la fonction réseau par l'option « activer/désactiver la fonction réseau » du menu. Vous pouvez attribuer le niveau de priorité le plus élevé au point d'accès, dans le menu "paramètres réseau".
Le point d'accès est introuvable. J'utilise un point d'accès répondant à la norme IEEE802.11a	PLEXTALK n'est compatible qu'avec la norme IEEE802.11b/g. Si votre routeur ne peut pas fonctionner en même temps avec les normes IEEE802.11a et IEEE802.11b/g, sélectionnez IEEE802.11b/g.
Le point d'accès est introuvable. J'utilise un SSID non broadcasté.	Les réseaux non broadcastés nécessitent un délai de connexion avec le PLEXTALK plus long. Laissez au PLEXTALK au moins 5 minutes pour établir cette connexion. Si possible, configurez le point d'accès afin que le SSID soit broadcasté. Si après cela la connexion s'établit, la conclusion est que la configuration générale est correcte, mais que le non-broadcast pose problème. Par contre, si la connexion échoue malgré tout, vérifiez les paramètres de sécurité.
La connexion ne s'établit pas. J'utilise le DHCP.	Même si PLEXTALK a pu établir une connexion au point d'accès, et a échoué en récupérant l'adresse IP, le message d'échec de connexion est annoncé. Essayez alors de configurer avec une adresse IP fixe. Si la connexion s'établit, c'est le DHCP qui pose problème. Vérifiez les paramètres du serveur DHCP. Si l'erreur persiste, vérifiez les paramètres de sécurité.
La connexion a échoué. J'utilise un filtre d'adresse MAC.	Lorsque le filtre des adresse MAC est activé dans les paramètres de sécurité de votre routeur, la connexion avec un périphérique non déclaré est refusée. Vous devez ajouter l'adresse MAC du PLEXTALK dans la configuration. Pour connaître cette adresse, consultez l'option "vérification des paramètres réseau" dans le menu des paramètres réseau.
PLEXTALK tente systématiquement de se connecter à un point d'accès non disponible. J'ai activé le paramètre SSID furtif.	Lorsqu'un réseau est configuré avec un SSID furtif (SSID non broadcasté), PLEXTALK tente systématiquement de s'y connecter. Associez à ce point d'accès un niveau de priorité inférieur dans la liste des réseaux.

Plextalk ne parvient pas à se connecter au service réseau. J'utilise une adresse IP fixe et le mode de sécurité WEP.	Si le mode de sécurité WEP est activé avec une adresse IP fixe, PLEXTALK se connecte au point d'accès même si le mot de passe est incorrect. Vérifiez le mot de passe WEP.
PLEXTALK est-il compatible avec le WPS (WIFI Protected Setup?)	WPS n'est pas supporté. Vous devez ajuster manuellement les paramètres réseau.
La connexion au point d'accès échoue.	Éteignez puis rallumez le routeur et le PLEXTALK.

Annexe F: Liste des combinaisons de touches pour la saisie.

Mode ABC

Nom de la touche	Fonction
#1	Symboles “.”, “@”, “/”, “:”, “1”
#2	a, b, c, ç, à, â, æ, 2, A, B, C, Ç, À, Â, Æ
#3	d, e, f, ë, é, è, ê, 3, D, E, F, Ë, É, Ê, Ë
#4	g, h, i, î, í, î, 4, G, H, I, Î, Í, Î
#5	j, k, l, 5, J, K, L
#6	m, n, o, ô, œ, 6, M, N, O, Ô, Æ
#7	p, q, r, s, 7, P, Q, R, S
#8	t, u, v, ü, ù, û, 8, T, U, V, Ü, Ù, Û
#9	w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z
#0	“?”, “_”, “=”, “0”
*	Retour arrière
* + #	Nouvelle ligne
#	Espace
Lecture/Stop	Début la lecture à la position actuelle / Pause
Flèche Haut	Appui simple: ligne précédente. Appui long: début du document.
Flèche Bas	Appui simple: ligne suivante. Appui long: fin du document.
Flèche Gauche	Appui simple: caractère précédent. Appui long: début de ligne.
Flèche Droite	Appui simple: caractère suivant. Appui long: fin de ligne.
0 + Flèche Haut	Paragraphe précédent
0 + Flèche Bas	Paragraphe suivant
0 + Flèche Gauche	Mot précédent
0 + Flèche Droite	Mot suivant
* + 1	Sauvegarder et quitter le mode édition
* + 2	Tab
* + 3	Retour arrière
* + 4	Insertion / Refrappe
* + 5	Origine
* + 6	Écran précédent (40 lignes au-dessus)
* + 7	Supprime

* + 8	Fin
* + 9	Écran suivant (40 lignes au-dessous)
Signet	Bascule entre les modes ABC, numérique et symboles.

Tableau des symboles

Nom de la touche	Fonction
#1	Non utilisé
#2	Appui simple: Haut Appui long: Atteindre le haut du tableau.
#3	Non utilisé
#4	Appui simple: Gauche Appui long: Atteindre la gauche du tableau.
#5	Annoncer le symbole sélectionné.
#6	Appui simple: Droite Appui long: Atteindre la droite du tableau.
#7	Non utilisé
#8	Appui simple: Bas Appui long: Atteindre le bas du tableau.
#9	Non utilisé
#0	Non utilisé
#	Entrer le symbole
(Symboles)	Le tableau est composé de 4 rangées et de 8 colonnes. ., ‘ “ : ; ? + - = / \ _ [] ! @ # \$ % ` { } ^ & * () ~ < >

Les autres touches ont la même fonction que dans le mode ABC.

2011/03 UG-FRE0600-E0600